



**Gebrauchsanweisung
Pflegebett
WESTFALIA III
WESTFALIA REHA**

**Instruction Manual
Nursing Bed
WESTFALIA III
WESTFALIA REHA**

Modellnummer / Model number
51.2431.11 S


Typ / Type
1151988 (Abbildung / Picture)
171625

Stand / Updated
Dezember / December 2007

Hilfsmittelnummer
Medical technical
aid register code*
19.40.01.3104
50.45.01.1104



- 1 Betthaupt Kopfteil
- 2 Rückenlehne
- 3 Aufrichterhülsen (2 Stück)
- 4 Matratzenbügel (4 Stück)
- 5 Seitengitterholme (4 Stück)
- 6 Oberschenkellehne
- 7 Unterschenkellehne
- 8 Betthaupt Fußteil
- 9 Führungsschienen (4 Stück)
- 10 Entriegelungsknöpfe für Seitengitter (4 Stück)
- 11 Laufrollen (4 Stück)
- 12 Antriebsmotoren für Rücken- und Oberschenkellehne (im Bild verdeckt)
- 13 Handschalter
- 14 Untergestell
- 15 Antriebsmotor Höhenverstellung und Zentrales Steuergerät

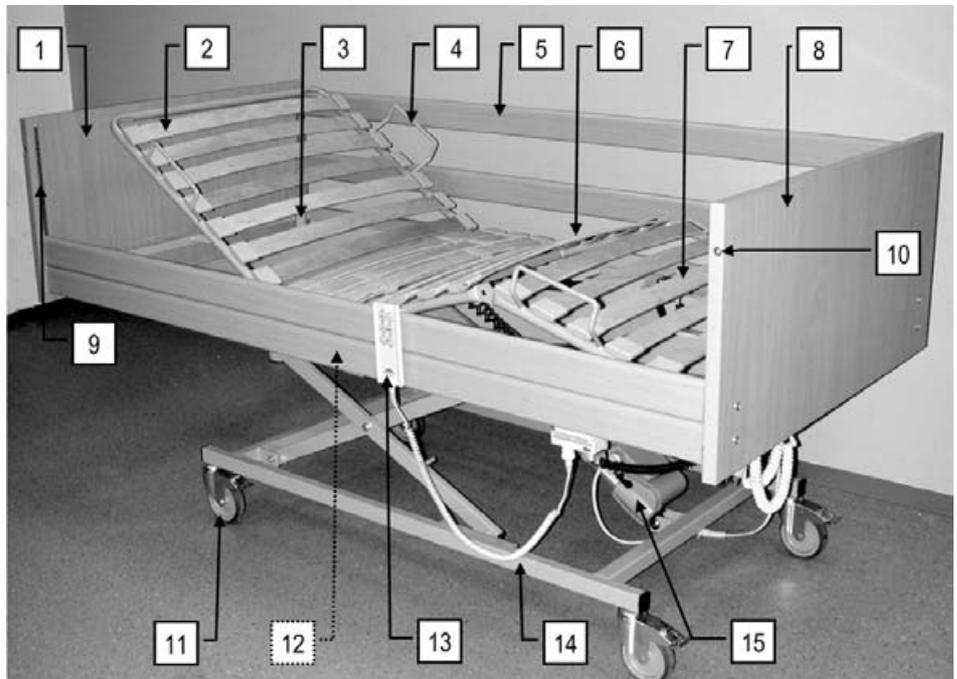

- | | | | |
|---|--------------------------|----|---|
| 1 | End board, head section | 9 | Guide bars (4) |
| 2 | Backrest | 10 | Release buttons for side rails (4) |
| 3 | Trapeze pole sockets (2) | 11 | Castors (4) |
| 4 | Mattress brackets (4) | 12 | Motor drives for backrest and thigh rest (not visible in picture) |
| 5 | Side rail beams (4) | 13 | Hand switch |
| 6 | Thigh rest | 14 | Base frame |
| 7 | Lower leg rest | 15 | Motor drive height adjustment and central control unit |
| 8 | End board, foot section | | |

Bitte merken:

In den Texten dieser Gebrauchsanweisung wird auf die Teile des Pflegebettes durch eckige Klammern und fettgedruckte Ziffern = **[00]** verwiesen.

Please notice:

In the text of these instructions square brackets and bold cyphers = **[00]** refer to the parts of the nursing bed.

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

 Seite
Page

<p>1 Vorwort</p> <p>2 Allgemeine Hinweise</p> <p>Erklärung der benannten Personengruppen</p> <p>Sicherheitshinweise</p> <p> Erklärung der verwendeten Sicherheitssymbole</p> <p> Sicherheitshinweise für Betreiber</p> <p> Sicherheitshinweise für Anwender</p> <p>Produktbeschreibung</p> <p> Bestimmungsgemäßer Gebrauch</p> <p> Besondere Merkmale</p> <p> Konstruktiver Aufbau</p> <p> Verwendete Werkstoffe</p> <p>3 Montage und Inbetriebnahme</p> <p>Montage</p> <p> Untergestell und Liegeflächenrahmen</p> <p> Montage der Betthäupter und Seitengitter</p> <p>Elektrischer Anschluss</p> <p>Anforderungen an den Aufstellungsort</p> <p> Erreichen der Betriebsbereitschaft</p> <p>Demontage</p> <p>4 Betrieb</p> <p>Spezielle Sicherheitshinweise zum Antriebssystem</p> <p>Handschalter</p> <p> Bedienung des Handschalters</p> <p> Sperrfunktion</p> <p>Laufrollen</p> <p>Netzkabelhalter</p> <p>Aufrichter</p> <p>Triangelgriff</p>	<p>Preface</p> <p>General notes</p> <p> Definitions of involved persons</p> <p> Safety instructions</p> <p> Meaning of the safety symbols</p> <p> Safety instructions for operators</p> <p> Safety instructions for users</p> <p> Product description</p> <p> Normal operating procedure</p> <p> Special features</p> <p> Structural design</p> <p> Description of materials</p> <p>Assembly and start up procedure</p> <p> Assembly</p> <p> Base frame and reclining surface frame</p> <p> Assembly of the end boards and side rails</p> <p> Electrical connection</p> <p> Location requirements</p> <p> Achieving operational readiness</p> <p> Disassembly</p> <p>Operations</p> <p> Special safety instructions for the drive unit</p> <p> Hand switch</p> <p> Operating the hand switch</p> <p> Locking function</p> <p> Castors</p> <p> Power cable holder</p> <p> Trapeze pole</p> <p> Trapeze</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>13</p> <p>13</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>17</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>27</p> <p>27</p> <p>29</p> <p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p>
---	--	---

	Unterschenkellehne	Lower leg rest	34
	Seitengitter	Side rails	34
	Notabsenkung der Rückenlehne	Emergency lowering of the backrest	37
5	Reinigung und Desinfektion	Cleaning and disinfecting	39
	Allgemeines	General	39
	Reinigungs- und Desinfektionsplan	Cleaning and disinfection plan	40
	Einweisung der Anwender und des Fachpersonals	Instructing the user and qualified personnel	41
	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	Cleaning supplies and disinfectants	42
	Umgang mit Desinfektionsmittel	Contact with disinfectants	44
6	Instandhaltung	Maintenance	45
	Durch den Anwender	By the user	46
	Durch den Betreiber	By the operator	49
	Ersatzteile	Spare parts	50
	Herstelleranschrift	Manufacturer's address	55
	Austausch elektrischer Komponenten	Replacement of electrical components	55
7	Fehlerbehebung	Troubleshooting	57
8	Zubehör	Accessories	60
	Anforderungen an die Matratze	Requirements of the mattress	61
9	Technische Daten	Technical data	61
	Abmessungen und Gewichte	Measurements and dimensions	61
	Elektrische Daten	Electrical data	62
	Umgebungsbedingungen	Ambient conditions	63
	Angewendete Normen / Richtlinien	Applied standards and guidelines	64
10	Entsorgungshinweise	Disposal instructions	64
11	Konformitätserklärung	Declaration of conformity	66

VORWORT

Sehr geehrter Kunde,
die Firma BURMEIER dankt Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben.

Das Pflegebett WESTFALIA III/REHA ist werkseitig auf elektrische Sicherheit und Funktion geprüft und hat unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung auf jeden Fall.

Dies gilt besonders für die Aufbauphase aber auch für den täglichen Gebrauch. Sie ist ebenfalls ein praktisches Nachschlagewerk. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung griffbereit auf.

Diese Gebrauchsanweisung informiert Sie als Betreiber und die Anwender über alle Funktionen, die für eine komfortable Handhabung und sichere Bedienung notwendig sind.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Anwendern viel Erfolg bei der Pflege von pflegebedürftigen Personen und sind überzeugt, mit unserem Produkt einen positiven Beitrag zu leisten.

BURMEIER GmbH & Co. KG

PREFACE

Dear customer,
Thank you for the confidence you have shown in BURMEIER.

The nursing bed WESTFALIA III/REHA is factory-checked for electrical safety and function and has left our factory in faultless condition.

Please take time to read this manual carefully. This applies especially to the assembly phase but also to daily use.

It is also a practical reference guide. Keep the instructions in a handy place.

These instructions provide information for the operator and user regarding the convenient handling and safe operation.

We wish you and your users much success in care-giving and we are convinced that our product will make a positive contribution.

BURMEIER GmbH & Co. KG

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Pflegebetten WESTFALIA III und WESTFALIA REHA werden in verschiedenen Modellversionen hergestellt. Diese Gebrauchsanweisung beschreibt eventuell Funktionen oder Ausstattungen, die Ihr Modell nicht besitzt.

WESTFALIA III Modelle:

Modellnummer: 51.2431.11S

Liegefläche Holz, 100 cm breit, 4-teilig

Seitengitter aus Holz, 2 Holme

GENERAL NOTES

The nursing beds WESTFALIA III und WESTFALIA REHA are available in various models. These instructions may describe functions and accessories which are not included with your model.

WESTFALIA III Models:

Model number: 51.2431.11S

Wooden Reclining surface, 100 cm wide, 4 parts

Wooden side rails, 2 beams

Modellnummer: 51.2431.11S
Liegefläche Holz, 100 cm breit, 4-teilig
Seitengitter aus Holz, 3 Holme

Modellnummer: 51.2431.11S
Liegefläche Holz, 90 cm breit, 4-teilig
Seitengitter aus Holz, 2 Holme

Modellnummer: 51.2431.11S
Liegefläche Holz, 90 cm breit, 4-teilig
Seitengitter aus Holz, 3 Holme

Modellnummer: 51.2431.11S
Liegefläche Holz, 80 cm breit, 4-teilig
Seitengitter aus Holz, 2 Holme

Modellnummer: 51.2431.11S
Liegefläche Holz, 80 cm breit, 4-teilig
Seitengitter aus Holz, 3 Holme

WESTFALIA REHA Modell:

Modellnummer: 51.2431.11S
Liegefläche Metall, 90 cm breit, 4-teilig
Seitengitter aus Holz, 2 Holme

Modellnummer: 51.2431.11S
Liegefläche Metall, 90 cm breit, 4-teilig
Seitengitter aus Holz, 3 Holme

Vor der ersten Inbetriebnahme des Pflegebettes:

■ Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch. So vermeiden Sie Schäden an Personen oder Material aufgrund von Fehlbedienung.

■ Beachten Sie die Hinweise für zugelassene Matratzen nach DIN 13014 (siehe Seite 61).

■ Reinigen und desinfizieren Sie das Pflegebett vor der ersten Benutzung.

Das Pflegebett WESTFALIA III/REHA erfüllt alle Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Es ist gemäß Medizinproduktegesetz (MPG §13) als aktives Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.

Der Anwender hat sich gemäß der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) § 2

Model number: 51.2431.11S
Wooden Reclining surface, 100 cm wide, 4 parts
Wooden side rails, 3 beams

Model number: 51.2431.11S
Wooden Reclining surface, 90 cm wide, 4 parts
Wooden side rails, 2 beams

Model number: 51.2431.11S
Wooden Reclining surface, 90 cm wide, 4 parts
Wooden side rails, 3 beams

Model number: 51.2431.11S
Wooden Reclining surface, 80 cm wide, 4 parts
Wooden side rails, 2 beams

Model number: 51.2431.11S
Wooden Reclining surface, 80 cm wide, 4 parts
Wooden side rails, 3 beams

WESTFALIA III Modell:

Model number: 51.2431.11S
Iron Reclining surface, 90 cm wide, 4 parts
Wooden side rails, 2 beams

Model number: 51.2431.11S
Iron Reclining surface, 90 cm wide, 4 parts
Wooden side rails, 3 beams

Before putting the nursing bed into operation for the first time:

■ Read these instructions carefully in order to avoid damage or incorrect operation.

■ Follow the references for authorized mattresses according to DIN 13014 (see page 61).

■ Clean and disinfect the nursing bed before first use.

The nursing bed WESTFALIA III/REHA complies with all requirements of the guidelines 93/42/EWG for medical products. It is classified as a dynamic medical product of the class I in accordance with "Medizinproduktegesetz (German abbreviation: MPG § 13, Medical Products Act)."

According to the "Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) § 2, before using the

vor der Benutzung eines Pflegebettes von der Funktionsfähigkeit und dem ordnungsgemäßen Zustand des Pflegebettes zu überzeugen und die Gebrauchsanweisung zu beachten. Gleiches gilt für Zubehör.

Beachten Sie deshalb auch Ihre Verpflichtungen als Betreiber gemäß der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV), um einen dauerhaft sicheren Betrieb dieses Medizinproduktes ohne Gefährdungen für Patienten, Anwender und Dritte sicherzustellen.

Das Pflegebett WESTFALIA III/REHA ist durch ein unabhängiges Prüfinstitut geprüft worden. Wie jedes technische, elektrische Gerät kann es bei unsachgemäßer Bedienung zu Gefährdungen führen.

Diese Gebrauchsanweisung enthält Sicherheitshinweise, die beachtet werden müssen. Alle Personen, die an und mit dem Pflegebett WESTFALIA III/REHA arbeiten, müssen den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung kennen und die Sicherheitshinweise befolgen.

ERKLÄRUNG DER BENANNTEN PERSONENGRUPPEN

In dieser Gebrauchsanweisung werden folgende Personengruppen benannt:

Betreiber

Betreiber (z.B.: Sanitätshäuser, Fachhändler, Krankenkassen) ist jede natürliche oder juristische Person, die das Pflegebett WESTFALIA III/REHA verwendet oder in deren Auftrag es verwendet wird. Dem Betreiber obliegt die ordnungsgemäße Einweisung der Anwender.

Anwender

Anwender sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung oder Unterweisung berechtigt sind, das Pflegebett WESTFALIA III/REHA zu bedienen oder an ihm Arbeiten zu

nursing bed, the user shall ensure that it is in proper working order and free of defects, and be aware of the instruction manual. This applies also to accessories..

Observe your obligations as operator in accordance with medical devices "Medizinprodukte-Betreiberverordnung (*German abbreviation: MPBetreibV, Operators of Medical Products Ordinance*)" in order to ensure a dependable and safe operation of this medical device without endangering patients, users and third parties.

The nursing bed WESTFALIA III/REHA is checked by an independent examining institute. As with all technical, electrical devices improper handling can lead to damage and/or injury.

This manual contains safety guidelines, which must be observed. All persons who work with the nursing bed WESTFALIA III/REHA must familiarize themselves with these instructions and follow the safety guidelines.

DEFINITIONS OF INVOLVED PERSONS

In this manual the following persons are involved:

Operator

Operators (e.g.: Medical Supply Houses, Dealers and representatives, health insurance companies) are natural persons or legal entities, who utilize the nursing bed WESTFALIA III/REHA or authorize its use. The operator is responsible for instructing the user in the proper use of the unit.

User

Users are persons who as a result of training and experience are authorized to assemble, perform maintenance and/or operate the nursing

verrichten, bzw. in die Handhabung des Pflegebettes eingewiesen sind. Weiterhin kann der Anwender mögliche Gefahren erkennen und vermeiden und den klinischen Zustand des Patienten beurteilen.

Patient

In dieser Gebrauchsanweisung wird als Patient eine pflegebedürftige, behinderte oder gebrechliche Person bezeichnet, die in diesem Pflegebett liegt.

Fachpersonal

Als Fachpersonal werden Mitarbeiter des Betreibers bezeichnet, die aufgrund ihrer Ausbildung oder Unterweisung berechtigt sind, das Pflegebett auszuliefern, zu montieren, zu demontieren und zu transportieren. Weiterhin sind sie in die Vorschriften zur Reinigung und Desinfektion eingewiesen.

bed WESTFALIA III/REHA. Furthermore, the user can recognize and avoid possible dangers, and judge the clinical condition of the patient.

Patient

In this manual a patient is an infirm or handicapped person who reclines on the nursing bed.

Specialist staff

Specialist staff are employees of the operator who are authorized as a result of their education and training to deliver, assemble, dismantle and transport the nursing bed. Furthermore, they are familiar with the regulations for cleaning and disinfecting the unit.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Pflegebett WESTFALIA III/REHA entspricht zum Zeitpunkt der Auslieferung dem neuesten Stand der Technik und ist durch ein unabhängiges Prüfinstitut geprüft.

■ Verwenden Sie das Pflegebett WESTFALIA III/REHA nur im einwandfreien Zustand.

ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SICHERHEITSSYMBOLS

In der vorliegenden Gebrauchsanweisung werden folgende Sicherheitssymbole verwendet:

Warnung vor Personenschäden

Gefährliche elektrische Spannung. Es besteht Lebensgefahr.



SAETY INSTRUCTIONS

The nursing bed WESTFALIA III/REHA represents the latest technological development at the time of delivery and is checked by an independent examining institute.

■ Do not use the nursing bed WESTFALIA III/REHA if it is damaged.

MEANING OF THE SAFETY SYMBOLS

In these instructions the following safety symbols are used:

Warning about injuries to persons

Dangerous voltage. Life Threatening.



Allgemeine Gefahr. Es besteht Gefahr für Leben und Gesundheit.

General danger. Injury or life hazard.

Warnung vor Sachschäden

Warning about property damages



Sachschäden möglich, an Antrieben, Material oder Umwelt.

Possibility of damage to drive, material or environment.

Sonstige Hinweise

Other symbols



Nützlicher Tipp. Erleichtert die Bedienung des Pflegebettes oder dient zum besseren Verständnis.

Useful tip. For easier operation or better understanding of the unit.

Das jeweils verwendete Sicherheitssymbol ersetzt nicht den Text des Sicherheitshinweises. Lesen Sie deshalb den Sicherheitshinweis und befolgen Sie ihn genau!

The safety symbol used does not replace the text of the safety note. Therefore read the safety instructions and follow them exactly!

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BETREIBER

SAFETY INSTRUCTIONS FOR OPERATORS

- Beachten Sie Ihre Verpflichtungen gemäß MPBetreibV, um den dauerhaft sicheren Betrieb dieses Medizinproduktes ohne Gefährdungen für Patienten, Anwender und Dritte sicherzustellen.
- Weisen Sie jeden Anwender anhand dieser Gebrauchsanweisung, die zusammen mit dem Pflegebett überreicht werden muss, vor der ersten Inbetriebnahme in die sichere Bedienung des Pflegebettes ein.
- Weisen Sie die Anwender, gemäß MPBetreibV § 9, auf den Aufbewahrungsort dieser Gebrauchsanweisung hin.
- Machen Sie jeden Anwender auf eventuelle Gefährdungen bei nicht sachgerechter Verwendung aufmerksam. Dies betrifft besonders den Umgang mit den elektrischen Antrieben und den Seitengittern.

- Remember your responsibilities in accordance with the MPBetreibV in order to ensure the safe operation of this unit without endangering patients, users and third parties.
- Before first use, instruct every user in the safe operation of the nursing bed in accordance with these safety instructions, which must be supplied along with the unit.
- According to MPBetreibV 9 the user shall be notified of the location of this instruction manual.
- Call attention to the dangers of improper use of the unit, especially in regards to the electrical drives and side rails.
- The unit should only be operated by properly trained personnel.
- Make sure that representatives are also familiar with the operation of the nursing bed.

- Lassen Sie dieses Pflegebett nur durch eingewiesene Personen bedienen.

- Stellen Sie sicher, dass auch Vertretungspersonal hinreichend in die Bedienung des Pflegebettes eingewiesen ist.

- Führen Sie bei Langzeiteinsatz des Pflegebettes nach angemessenem Zeitraum (Empfehlung: jährlich) eine Kontrolle auf Funktion und sichtbare Beschädigungen durch (siehe Kapitel 6).

- Schließen Sie das Bett direkt an eine Steckdose an. Verlängerungskabel und/oder Mehrfachsteckdosen sollten nicht verwendet werden.

- Stellen Sie bitte sicher, dass beim Anbringen weiterer Geräte (z. B. Kompressoren von Luft-Lagerungssystemen usw.) eine sichere Befestigung und Funktion aller Geräte gegeben ist.

- Legen Sie keine Mehrfachsteckdosen unter das Pflegebett. Es besteht Brandgefahr durch eindringende Flüssigkeit.

- Beachten Sie besonders:

Sichere Verlegung aller beweglichen Anschlusskabel, Schläuche usw.

- ▶ Siehe Seite 13: *Bestimmungsgemäßer Gebrauch*

- ▶ Siehe Seite 27: *Sicherheitshinweise zum elektrischen Antriebssystem*

Bei Unklarheiten wenden Sie sich an die Hersteller der Zusatzgeräte oder an BURMEIER.

- Vergewissern Sie sich, ob Ihr Personal die Sicherheitshinweise einhält.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR ANWENDER

- Lassen Sie sich vom Betreiber in die sichere Bedienung des Pflegebettes einweisen.

- Überzeugen Sie sich vor jeder Benutzung vom ordnungsgemäßen und fehlerfreien Zustand des Pflegebettes.

- During long term use it is recommended that the nursing bed be inspected for function and visible damage at regular intervals (Recommendation: yearly) (see chapter 6).

- Connect the bed directly to an electrical outlet. Do not use extension cables and/or multiple outlet extension cables.

- When attaching other equipment (e.g. compressors for positioning systems) make sure that they are mounted and can function in a secure and safe manner.

- Do not put multiple outlet electrical extensions under the nursing bed. Leaking liquids can cause a fire hazard.

- Pay special attention to:

Securely locating of all wiring, cables, tubes, etc.

- ▶ See page 13: *Normal operating procedure*

- ▶ See page 27: *Special safety instructions for the drive unit*

For further information please contact the manufacturer of the accessories or BURMEIER directly.

- Make sure that your personnel follow the safety instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USERS

- Let the operator instruct you in the safe use of the nursing bed.

- Before each use make sure that the nursing bed is in proper and faultless condition.

- Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse wie Möbel oder Dachschrägen die Verstellvorgänge behindern.
 - Beachten Sie bei Einsatz externer elektrischer Komponenten, wie z. B. Patientenliftern, Leseleuchten oder Kompressoren für Lagerungssysteme, dass sich deren Netzkabel nicht in beweglichen Teilen des Pflegebettes verfangen oder beschädigt werden können.
 - Schließen Sie das Bett direkt an eine Steckdose an. Verlängerungskabel und/oder Mehrfachsteckdosen sollten nicht verwendet werden.
 - Stellen Sie sicher, dass beim Anbringen weiterer Geräte (z. B. Kompressoren von Lagerungssystemen usw.) eine sichere Befestigung und Funktion aller Geräte gegeben ist.
 - Legen Sie keine Mehrfachsteckdosen unter das Pflegebett. Es besteht Brandgefahr durch eindringende Flüssigkeit.
 - Achten Sie auf eine sichere Verlegung aller beweglichen Anschlusskabel, Schläuche usw. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an die Hersteller der Zusatzgeräte oder an BURMEIER.
 - Nehmen Sie das Pflegebett außer Betrieb, wenn der Verdacht einer Beschädigung oder Fehlfunktion besteht:
 - ▶ Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose;
 - ▶ Kennzeichnen Sie das Pflegebett deutlich als "DEFEKT";
 - ▶ Melden Sie dieses umgehend dem zuständigen Betreiber.
- Eine Checkliste zur Beurteilung des ordnungsgemäßen Zustandes finden Sie in Kapitel 6.



- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es beim Betrieb des Pflegebettes nicht gezerrt, überfahren oder durch bewegliche Teile gefährdet werden kann.

- Take care that no obstacles, such as furniture or slanted ceilings interfere with the adjustment functions.
 - Pay attention that when using additional electrical components, such as patient lifts, reading lights or compressors for positioning systems that their electrical cables do not get entangled or damaged by the moving parts of the bed.
 - Connect the bed directly to an electrical outlet. Do not use extension cables and/or multiple outlet extension cables.
 - Make sure that when attaching other appliances (e.g. compressors for positioning systems) that a safe mounting and function is guaranteed.
 - Do not put multiple electrical outlets under the nursing bed. Leaking liquids can be a fire hazard.
 - Pay special attention to securely locating all wiring, cables, tubes, etc.
- For further information please contact the manufacturer of the accessories or BURMEIER directly.
- Take the nursing bed out of operation if damage or a malfunction is suspected:
 - ▶ Immediately unplug the electrical plug from the wall outlet;
 - ▶ Clearly mark the nursing bed as "DEFECTIVE";
 - ▶ Promptly notify the appropriate operator.

A checklist for assessing the proper condition is located in Chapter 6.

- Position the power cable in such a way that during normal operation of the nursing bed the cable will not be stretched, driven over or interfere with moving parts of the bed.



- Ziehen Sie vor jedem Transport unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose und legen Sie das Netzkabel in den Netzkabelhalter.
- Kontrollieren Sie das Netzkabel regelmäßig auf mechanische Beschädigung hin (Abschürfungen, blanke Drähte, Knickstellen, Druckstellen usw.) und zwar:
 - ▶ nach jeder größeren mechanischen Belastung (z. B. Überfahren des Netzkabels mit dem Pflegebett selbst; mit einem Gerätewagen; nach starken Zug- und Biegebeanspruchungen durch Wegrollen des Pflegebettes trotz eingestecktem Netzkabel);
 - ▶ nach einer Standortveränderung/Verschieben vor dem Einstecken des Steckers;
 - ▶ im laufenden Betrieb regelmäßig durch den Anwender.
- Kontrollieren Sie die Zugentlastung des Netzkabels regelmäßig. Sie muss fest verschraubt sein.
- Verwenden Sie den Freiraum unter dem Pflegebett nicht als "Parkplatz" für irgendwelche Utensilien.
- Bringen Sie die Liegefläche in die tiefste Position, wenn Sie das Pflegebett mit dem Patienten unbeaufsichtigt lassen. Das Verletzungsrisiko des Patienten beim Ein- bzw. Aussteigen wird verringert.
- Verwahren Sie den Handschalter bei Nichtgebrauch stets so, dass er nicht unbeabsichtigt herunterfallen kann (Aufhängen am Haken). Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht durch bewegliche Teile des Pflegebettes beschädigt werden kann.
- Bringen Sie zum Schutz des Patienten und besonders Kindern vor ungewollten elektrischen Verstellungen den Handschalter außerhalb ihrer Reichweite an (z.B. am Fußteil), oder sperren Sie den Handschalter, wenn:

- Before any relocation of the nursing bed it is imperative that the power cable is pulled from the wall socket and be secured in the power cable holder.
- Check the power cable regularly for damage (abrasions, exposed wires, kinks, pressure marks, etc.) in particular:
 - ▶ after every larger mechanical strain (e.g.: rolling over the power cable with the nursing bed or with an equipment cart; after a strong pulling or bending load caused by the bed rolling away with the power cable still attached to the wall outlet.
 - ▶ after relocating/moving and before plugging in the power cable.
 - ▶ during prolonged operating by the user.
- Regularly inspect the cord grip of the power cable. It must be tightly screwed in.
- Do not use the area under the nursing bed as a "parking spot" for any utensils.
- Lower the reclining surface to its lowest position when leaving the patient unattended. This reduces the risk of injury to the patient getting in and out of the nursing bed.
- Keep the hand switch safe from accidentally falling during non-use (Hang it on the hook). Take care that the cable is not damaged by the moving parts of the nursing bed.
- To protect the patient and especially children from unintentionally adjusting the hand switch, place it beyond their reach (e.g. at the foot end) or lock the hand switch when:
 - ▶ the patient is not able to control the bed safely or is unable to get out of dangerous positions without help;
 - ▶ the patient could be endangered, because of unintentional adjustments to the drive motor;



- ▶ der Patient nicht in der Lage ist, das Bett sicher zu bedienen oder sich aus gefährlichen Lagen selbst zu befreien;
 - ▶ der Patient durch ungewolltes Verstellen der Antriebsmotoren gefährdet werden könnte;
 - ▶ die Seitengitter angestellt sind:
Es besteht sonst Quetschgefahr von Gliedmaßen beim Verstellen von Rücken- und Oberschenkellehne;
 - ▶ sich Kinder unbeaufsichtigt in dem Raum mit dem Pflegebett aufhalten.
- Die Verstellungen dürfen dann nur von einer eingewiesenen Person oder in Anwesenheit einer eingewiesenen Person ausgeführt werden!

- ▶ the side rails are up:
(There is a possible danger that limbs could be squeezed when adjusting the back and thigh rest);
 - ▶ unsupervised children are in the room with the nursing bed.
- Adjustment functions can only be performed by a trained person or in the presence of a trained person.

PRODUKTBESCHREIBUNG

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Pflegebett WESTFALIA III/REHA, nachfolgend Bett genannt, dient als komfortable Lösung zu Lagerung und Erleichterung der Pflege von pflegebedürftigen, gebrechlichen Menschen in Senioren- und Pflegeheimen. Weiterhin wurde es als komfortable Lösung für die häusliche Pflege, von pflegebedürftigen, behinderten oder gebrechlichen Menschen entwickelt. Es soll diese Pflege unterstützen.
- Das Pflegebett WESTFALIA III/REHA ist nicht für den Einsatz in Krankenhäusern konzipiert.
- Dieses Bett kann für die Pflege unter Anweisung eines Arztes bestimmt sein und zur Diagnose, Behandlung oder Beobachtung des Patienten dienen. Es ist daher mit einer Sperrfunktion der elektrischen Verstelleinrichtungen ausgerüstet.
- Dieses Bett hat keine spezielle Anschlussmöglichkeit für einen Potentialausgleich. Beach-

PRODUCT DESCRIPTION

NORMAL OPERATING PROCEDURE

- The nursing bed WESTFALIA III/REHA, hereafter called bed, serves as a comfortable solution for positioning and easing the care of infirm, frail people in senior or nursing homes. Additionally it was developed as a comfortable solution for in-home care of infirm, handicapped or frail people. It will support this care.
- The nursing bed WESTFALIA III/REHA is not intended for use in hospitals.
- This bed can be used for care under the instructions of a physician and can serve in diagnosing, treatment and observation of a patient. It is therefore equipped with a locking mechanism for the electrical adjustment functions.
- This bed has no special connector possibilities for a potential equalization. Consider this before combining with additional electrically operated (medical) devices. Further references about additionally applicable precautions can be found:

ten Sie dieses vor Zusammenschluss mit zusätzlichen netzbetriebenen (medizinischen) Geräten. Weitere Hinweise über gegebenenfalls zu treffende zusätzliche Schutzmaßnahmen finden Sie:

- ▶ In den Gebrauchsanweisungen dieser zusätzlichen, netzbetriebenen Geräte (z. B. Luft-Lagerungssysteme, Infusionspumpen, Ernährungs sonden, usw.)
- ▶ In der Norm DIN EN 60601-1-1:2002 (Sicherheit von medizinischen elektrischen Systemen)
- ▶ In der Norm VDE 0107:1994 (Starkstromanlagen in Krankenhäusern)
- Die sichere Arbeitslast beträgt 1700 N (~175 kg), wobei ein Patientengewicht von 135 kg berücksichtigt ist. Die restlichen 40 kg verteilen sich auf Matratze und angebaute Zubehörteile.
- Dieses Bett ist für Patienten mit einer Körpergröße unter 150 cm nicht geeignet. Beachten Sie besonders bei Patienten mit schlechtem klinischen Zustand die Sicherheitshinweise in Kapitel 4.
- Dieses Bett darf nur von ausgewiesenen Personen bedient werden.
- Dieses Bett ist für mehrfache Wiederverwendung geeignet. Beachten Sie die hierbei notwendigen Voraussetzungen:
 - ▶ Siehe Kapitel 5
 - ▶ Siehe Kapitel 6.
- Auch während der Patient im Bett liegt, darf das Bett innerhalb des Gebäudes verfahren werden.

Dieses Bett darf nur unter den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Einsatzbedingungen betrieben werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

▶ In the instructions for the additional electrically operated devices (e.g. compressors for positioning systems, infusion pumps, nutrition probe ...)

- ▶ In the Standard DIN EN 60601-1-1:2002 (Safety of medical electrical systems)
- ▶ In the Standard VDE 0107:1994 (High current systems in hospitals)
- The safe working load amounts to 1700 N (~175 kg), whereas a patient weight of 135 kg has been allowed. The remaining 40 kg are allocated for the mattress and attached accessories.
- This bed is not appropriate for patients less than 150 cm tall. Observe, especially with patients in poor health condition, the safety tips in chapter 4.
- This bed may only be operated by trained personnel.
- This bed is useful for multiple re-use. Bear in mind the necessary requirements:
 - ▶ See chapter 5
 - ▶ See chapter 6.
- While the patient also is lying in bed, it is allowed to drive the bed within the building.

This bed may only be operated under the operating instructions laid out in this instruction manual.

Any other use is deemed to be inappropriate.



Wichtig!
Important!

Dieses Produkt ist nicht für den nordamerikanischen Markt, insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), zugelassen. Die Verbreitung und Nutzung des Pflegebettes in diesen Märkten, auch über Dritte, ist seitens des Herstellers untersagt.

Sale of this product in North America, especially in the United States of America, is prohibited. Distribution and use of the nursing bed, including distribution and use by third parties in these markets is forbidden by the Manufacturer.

BESONDERE MERKMALE

- ◆ Elektrische Höhenverstellung der Liegefläche von ca. 40 bis 80 cm.
- ◆ Elektrische Verstellung der Rückenlehne von 0° bis ca. 70°.
- ◆ Elektrische Verstellung der Beinlehne von 0° bis ca. 35°.
- ◆ Fahrbar durch vier Laufrollen, alle einzeln zu bremsen.
- ◆ Liegefläche 200 x 80/90/100 cm, viergeteilt
- ◆ Seitengitter beidseitig, absenkbar.

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Das Bett wird zerlegt in Kartons geliefert. Es kann auch in Mehrfamilienhäusern problemlos transportiert werden. Es besteht aus zwei Betthäuptern (Kopf- und Fußteil); einem durchgehenden Liegeflächenrahmen; vier oder sechs Seitengitterholmen und einem Aufrichter mit Triangelgriff. Das Bett steht auf vier lenkbaren Laufrollen, die alle mit einer Feststellbremse ausgestattet sind.

Liegeflächenrahmen

Der Liegeflächenrahmen ist vierfach unterteilt: in eine bewegliche Rückenlehne, ein festes Mittelteil und eine bewegliche Ober- und Unterschenkellehne. Die Rücken- und Oberschenkellehne können mit Hilfe von Elektromotoren verstellbar werden. Die Liegefläche kann waagrecht in der Höhe verstellbar werden. Alle Verstellungen werden über einen Handschalter ausgelöst. WESTFALIA REHA hat eine Liegefläche aus Metall.

SPECIAL FEATURES

- ◆ Electrical height adjustment of the reclining surface from about 40 cm to 80 cm.
- ◆ Electrical adjustment of the backrest from 0° to about 70°.
- ◆ Electrical adjustment of the leg rest from 0° to about 35°.
- ◆ Rolls on four individually-locking castors.
- ◆ Reclining surface of 200 x 80/90/100 cm, divided into four areas.
- ◆ Side rails on both sides can be lowered.

STRUCTURAL DESIGN

The bed is shipped disassembled in cartons. It can be transported without problems even in apartment homes. It consists of two end boards (head- and foot section); a continuous reclining surface frame; four or six side rail beams and a trapeze pole with trapeze handle. The bed stands on four steerable, individually-locking castors.

Reclining surface frame

The reclining surface frame has four sections: a movable backrest, a firm middle section, a moveable thigh rest and lower leg rest. The back and thigh rest can be adjusted with the aid of electric motors. The horizontal height of the reclining surface can be adjusted. All adjustment functions are controlled by a hand switch. The reclining surface frame of WESTFALIA REHA is iron.

Seitengitter

Das Bett hat beidseitig Seitengitterholme, die zu einer Barriere angestellt oder bei Nichtbedarf abgesenkt werden können. So ist der Patient gegen unbeabsichtigtes Herausfallen aus dem Bett gesichert.

Elektrisches Verstellsystem

Das elektrische Verstellsystem dieses Bettes ist erstfahlersicher, flammhemmend (V0) und besteht aus:

- dem Zentralen Steuergerät; in ihm wird, in einem Transformator, eine für Patient und Anwender ungefährliche 24-Volt-Schutz-Kleinspannung erzeugt. An dem Zentralen Steuergerät sind alle Antriebsmotoren und der Handschalter über Steckverbindungen angeschlossen, die mit dieser 24-Volt-Schutz-Kleinspannung arbeiten;
- den Antriebsmotoren für die Rücken- und Oberschenkellehne;
- dem Antriebsmotor für die Höhenverstellung der Liegefläche;
- einem Handschalter mit stabilen Haken. Der Anwender kann die Verstellmöglichkeiten des Handschalters sperren, wenn der schlechte klinische Zustand des Patienten dies erfordert.

VERWENDETE WERKSTOFFE

Das Bett ist zum größten Teil aus Stahlprofilen gebaut, deren Oberfläche mit einer Polyester-Pulverbeschichtung überzogen ist, oder einen metallischen Überzug aus Zink oder Chrom besitzt. Die Betthäupter, die Seitengitterholme sowie die Federholzplatten bestehen aus Holz bzw. Holzwerkstoffen, dessen Oberflächen versiegelt wurden.

Alle Oberflächen sind unbedenklich gegen Hautkontakt.

Side Rails

The bed has side rail beams on both sides which can be raised as a barrier or lowered when not needed. This safeguards the patient from accidentally falling out of the bed.

Electric adjustment system

The electrical adjustment system of this bed is error protected, flame-retardant (V0) and consists of:

- the central control unit. For the safety of patient and user, safety low-voltage of 24 volt is produced in the control unit by means of a transformer. All drive motors and the hand switch are hooked up to the central control unit by plug-in connections and work with the 24 volt safety low-voltage;
- the drive motors for the back and thigh rest;
- one drive motor for the height adjustment of the reclining surface;
- a hand switch with a sturdy hook. The user can lock the adjustment functions of the hand switch if the poor clinical condition of the patient warrants it.

DESCRIPTION OF MATERIALS

The bed is mostly constructed out of steel sections, their surfaces has been polyester-powder-coated, or with a metallic coating of zinc and chrome. The end boards, the side rail beams and the spring wood slats consist of wood and derived timber products whose surface has been sealed.

All surfaces are harmless to skin contact.

MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

Das Bett wird zerlegt angeliefert. Die Montage erfolgt vor Ort durch das Fachpersonal des Betreibers. Für die Montage werden zwei Personen benötigt.

Verpackungseinheiten:

Karton 1:

Liegefläche mit Motoren für die Oberschenkel- und Rückenlehne; vier Seitengitterholme; Aufrichter mit Haltegriff; Gebrauchsanweisung

Karton 2:

Zwei Betthäupter

Karton 3:

Untergestell mit Motor für die Höhenverstellung; Handschalter; Kabelbaum

Benötigtes Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 3

Inbusschlüssel Gr. 5

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Kabelbinder bevor Sie mit der Montage beginnen.

MONTAGE

UNTERGESTELL UND LIEGEFLÄCHENRAHMEN

- ☞ Bremsen Sie die Laufrollen am Untergestell (siehe Seite 31).
- ☞ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- ☞ Fahren Sie das Untergestell in die höchste Position (siehe Seite 29).
- ☞ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



ASSEMBLY AND START UP PROCEDURE

The nursing bed is shipped disassembled. The assembly is taken care of at the destination by qualified personnel supplied by the operator. Two persons are needed for assembly.

Packaging Units:

Carton 1:

Reclining surface with motors for the thigh- and back rest; four side rail beams; trapeze pole with trapeze; instruction manual.

Carton 2:

Two end boards

Carton 3:

Base frame with motor for height adjustment; hand switch; wiring harness

Required tools:

Phillips head screwdriver size 3


Allen key size 5

Remove all packaging materials and cable ties before beginning with the assembly.

ASSEMBLY


BASE FRAME AND RECLINING SURFACE FRAME

- ☞ Lock the castors on the base frame (see page 31).
- ☞ Plug the power plug into a wall socket.
- ☞ Raise the base frame to its highest position (see page 29).
- ☞ Pull the power plug out of the wall socket.

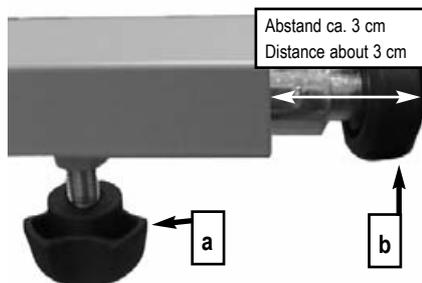


- ☞ Lösen Sie beide Rändelschrauben **[a]** die zur Arretierung der Führungsrollen **[b]** dienen.
- ☞ Ziehen Sie dann beide Führungsrollen aus dem Untergestell heraus, bis die Außenkante der Führungsrolle ca. 3 cm Abstand zum Vierkantrohr hat.
- ☞ Schrauben Sie danach die Rändelschrauben **[a]** nur von Hand leicht fest.

- ☞ Loosen both knurled screws **[a]** which serve for the stop of the guide rollers **[b]**.
- ☞ Pull the guide rollers out of the base frame until the outer edge of the guide roller is about 3 cm from the square pipe.
- ☞ Next tighten the knurled screws **[a]** only hand-tight.

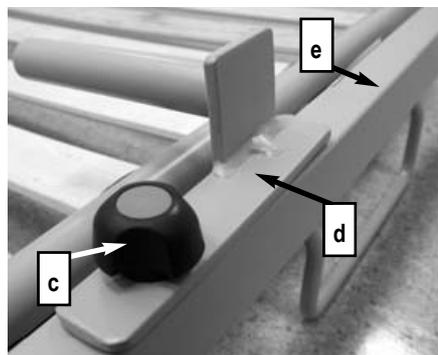

- ☞ Lösen Sie beide Rändelschrauben **[c]** um beide Halteböcke **[d]**, die unter dem Liegeflächenrahmen **[e]** befestigt sind, zu entfernen.
- Die Halteböcke verbinden den Liegeflächenrahmen mit dem Untergestell.

- ☞ Loosen both knurled screws **[c]** to remove the frame connectors **[d]**, which are underneath the reclining surface frame **[e]**.
- The frame connectors connect the reclining surface frame with the base frame.

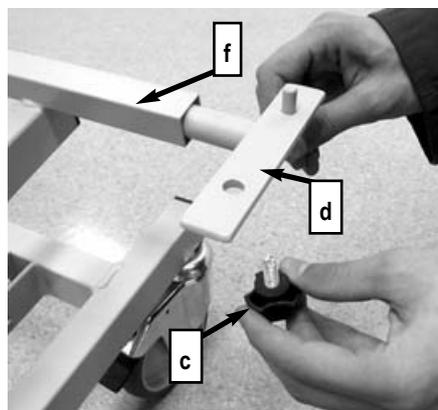

- ☞ Nachdem Sie beide Halteböcke entfernt haben, stecken Sie jeweils ein Haltebock in die offenen Enden des oberen Querrohr **[f]** am Untergestell.

Der linke und rechte Haltebock dürfen nicht vertauscht werden.

Das Querrohr ist innen gefettet. Wenn Sie den Haltebock versehentlich herausnehmen, wischen Sie das Fett nicht ab!

- ☞ After the frame connectors have been removed, plug one frame connector into each end of the upper cross beam **[f]** on the base frame.

The right and left frame connector must not be interchanged.

The cross beam is internally lubricated. If you accidentally pull out the frame connector, do not wipe off the lubricant.




☞ Heben Sie den Liegeflächenrahmen über das Untergestell [14].

Achten Sie darauf, dass sich die Unterschenkellehne [7] über dem Antriebsmotor Höhenverstellung [15] befindet.

☞ Lift the reclining surface frame on top of the base frame [14].

Make sure that the thigh rest [7] is above the motor drive height adjustment [15].

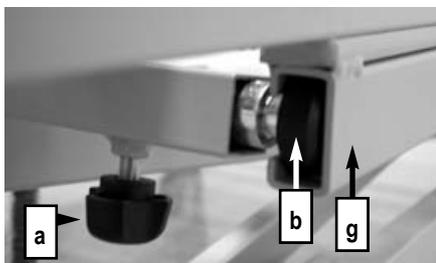

☞ Fügen Sie die zwei Führungsrollen [b] in die Führungsschienen [g] ein, die sich an der Unterseite des Liegeflächenrahmens befinden.


☞ Vermitteln Sie die Führungsrollen [b] so, dass diese leichtgängig in den Führungsschienen laufen.

☞ Schrauben Sie jetzt die Rändelschrauben [a] gut fest.

☞ Place the two guide rollers [b] into the guide tracks [g] which is on the bottom of the reclining surface frame.


☞ Arrange the guide rollers [b] so that they glide easily in the guide tracks.

☞ Tighten the knurled screws [a] firmly now.

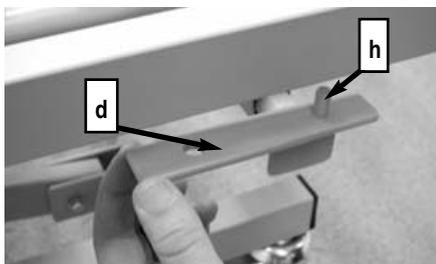


☞ Heben Sie den Liegeflächenrahmen leicht an und schwenken die Halteböcke [d] nach oben, so dass die Zapfen [h] in den Liegeflächenrahmen einrasten

☞ Slightly lift the reclining surface frame and swing the frame connectors [d] upwards so that the short pin [h] ratchets into the reclining surface frame.

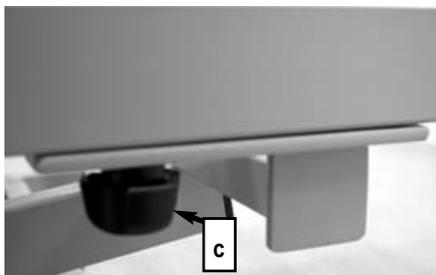

☞ Schrauben Sie die Halteböcke mit den dazugehörigen Rändelschrauben [c] am Liegeflächenrahmen gut fest.

☞ Screw the frame connectors to the reclining surface frame with the knurled screws provided [c].

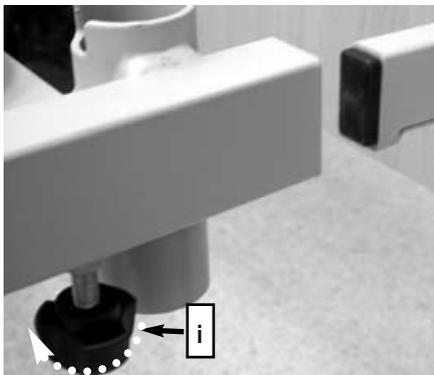

MONTAGE DER BETTHÄUPTER UND SEITENGITTER


Die beiden Betthäupter sind identisch.

☞ Lösen Sie alle vier Rändelschrauben [i] an den Enden und der Unterseite des Liegeflächenrahmens. Drehen Sie die Rändelschrauben nicht völlig heraus.

ASSEMBLY OF THE HEAD BOARDS AND SIDE RAILS.

The two end boards are identical.

☞ Loosen all four knurled screws [i] at the ends of the underside of the reclining surface frame. Do not remove the knurled screws completely.

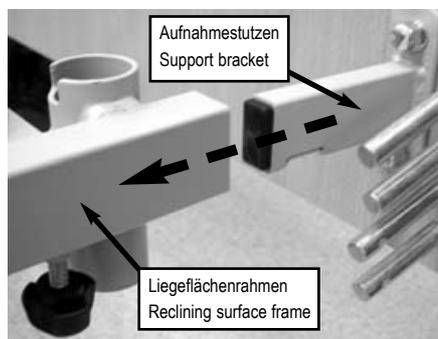

☞ Schieben Sie die beiden Aufnahmestutzen des Betthaupts Fußteil [8] in die Längsrohre des Liegeflächenrahmens bis zum Anschlag.

☞ Schrauben Sie die zwei Rändelschrauben [i] gut fest.

☞ Push the support brackets of the end board/foot section [8] completely into the side tubes of the reclining surface frame.


☞ Tighten the two knurled screws [i] firmly.

☞ Schieben Sie die beiden Aufnahmestutzen des Betthaupts Kopfteil [1] **nur zur Hälfte** in die Längsrohre des Liegeflächenrahmens.

Belassen Sie das Betthaupt Kopfteil in dieser Position.

☞ Push the support brackets of the end board/head section [1] **halfway** into the side tubes of the reclining surface frame.

Leave the end board/head section in this position.

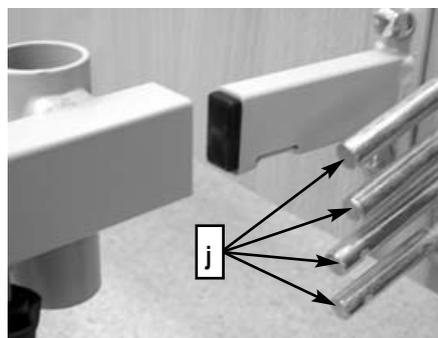

☞ Ziehen Sie die Metallzapfen [j], die in den Führungsschienen im Betthaupt Fußteil sind, hoch bis diese einrasten.

Die abgerundete Seite der Seitengitterholme muss nach oben weisen.

☞ Stecken Sie nun einen Seitengitterholm auf das **untere** Paar Metallzapfen.

Lassen Sie das andere Ende des Seitengitterholms auf dem Liegeflächenrahmen aufliegen.

☞ Stecken Sie danach einen weiteren Seitengitterholm auf das **obere** Paar Metallzapfen.

☞ Pull up the metal pins [j] which are in the guide track of the end board/foot section until they lock in place.

The rounded side of the side rail beams must point upwards.

☞ Now plug one side rail beam onto the **lower** pair of metal pins.

Let the other end of the side rail beam rest on the reclining surface frame.

☞ Then plug another side rail beam onto the **upper** pair of metal pins.



Lassen Sie das andere Ende des Seitengitterholms auf dem Liegeflächenrahmen aufliegen.

☞ Wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Bettseite.

☞ Ziehen Sie die Metallzapfen [j], die in den Führungsschienen im Betthaupt Kopfteil sind, hoch bis diese einrasten.

☞ Stecken Sie nun die beiden **unteren** Seitengitterholme auf das **untere** Paar Metallzapfen.

☞ Stecken Sie danach die beiden **oberen** Seitengitterholme auf das **obere** Paar Metallzapfen.

☞ Schieben Sie zum Schluss beide Aufnahmestützen des Betthaupt Kopfteil [1] bis zum Anschlag in den Liegeflächenrahmen.

☞ Schrauben Sie die beiden Schrauben [i] gut fest.

Let the other end of the side rail beam rest on the reclining surface frame.

☞ Repeat this procedure on the other side of the bed.


☞ Pull up the metal pins [j] which are in the guide track of the head board/head section until they lock in place.

☞ Plug the two **lower** side rail beams onto the **lower** pair of metal pins.

☞ Plug the two **upper** side rail beams onto the **upper** pair of metal pins.

☞ To finish, push both support brackets of the end board/head section [1] into the reclining frame to the limit.

☞ Tighten both screws [i] firmly.

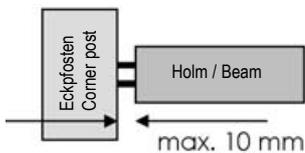

Zwischen dem Liegeflächenrahmen und den Eckpfosten des Betthaupt darf maximal 10 mm Abstand bestehen.

☞ Stecken Sie jetzt wieder den Netzstecker in die Steckdose.

There should be a maximum gap of 10 mm between the reclining surface frame and the corner post.

☞ Now plug the power plug into the wall socket together.


ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Das Zentrale Steuergerät versorgt die Antriebsmotoren über Spiralkabel mit der nötigen Spannung. Die Stecker, an den Enden der Spiralkabel, müssen in die jeweils richtigen Antriebsmotoren eingesteckt werden. Andererseits müssen die Spiralkabel von den Antriebsmotoren in das Zentrale Steuergerät eingesteckt werden.

Bevor Sie die Kabel anschließen, müssen Sie das Verpackungsmaterial von allen Kabeln entfernen.

STECKERBELEGUNG DES STEUERGERÄTES

Die Spiralkabel, die zu den jeweiligen Antriebsmotoren führen, sind am Zentralen Steuergerät wie folgt gekennzeichnet:

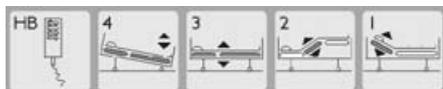

- 1 Motor Rückenlehne
 - 2 Motor Oberschenkellehne
 - 3 Nicht belegt (Blindstopfen)
 - 4 Motor Höhenverstellung
- HB** Handschalter

ELECTRICAL CONNECTION


The central control unit supplies the drive motors, through a spiral cable, with the needed voltage. The plugs, at the end of the spiral cables, must be plugged into the appropriate drive motors. The spiral cables from the drive motors must be plugged into the central control unit.

Before connecting the cables all packaging materials must be removed.

CONTROL UNIT PLUGS

The spiral cables leading to each drive motor are marked in the following way at the central control unit:

- 1 Backrest motor
 - 2 Thigh rest motor
 - 3 Not enabled (blind cap)
 - 4 Motor drive height adjustment
- HB** Hand switch

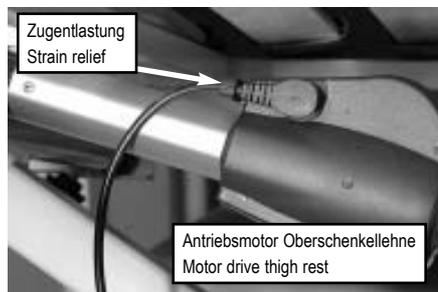

☞ Verlegen Sie die Kabel für die Antriebsmotoren und den Handschalter unter dem Liegeflächenrahmen.

☞ Stecken Sie die Stecker an den Kabelenden in die Antriebsmotoren für die Rückenlehne und Oberschenkellehne.

☞ Sichern Sie die Kabel, indem Sie die Zugentlastungen fest in die vorgesehene Öffnung rasten.

☞ Place the drive motor cables and the hand switch cable under the reclining surface frame.

☞ Insert the plugs at the ends of the cables into the connectors for the drive motors backrest and thigh rest.

☞ Secure the cables by snapping it tightly into the opening of the strain relief.



Stellen Sie sicher, dass keine Kabel beschädigt sind, sich keine Schlaufen bilden und die Kabel nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden.

Make sure that no cable is damaged, that there is no loop in the cables and that the cables are not crushed by moving parts.



Wichtig!
Important!

☞ Hängen Sie die Kabel in die beiden Kabelhalter. Die Kabelhalter befinden sich unterhalb des Liegeflächenrahmens.

☞ Hang the cables into the two cable holders. The cable holders are below of the recling surface frame.

Achten Sie beim Austausch einzelner elektrischer Komponenten stets darauf, dass deren Stecker bis zum Anschlag in das Zentrale Steuergerät eingesteckt sind und die Steckerabdeckleiste wieder angebracht wird. Nur so ist absolute Dichtigkeit und eine einwandfreie Funktion gewährleistet.

When exchanging single electrical components, always make sure that their plugs have been plugged back into the central control unit until they lock and the plug covering strips have been re-affixed. This will ensure a tight fit and a proper operation.

ZUGENTLASTUNG DES NETZKABELS

STRAIN RELIEF OF THE POWER CABLE

An dem Untergestell befindet sich die Zugentlastung für das Netzkabel.

At the base frame is the strain relief for the power cable.

☞ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in der Zugentlastung eingehängt ist und fest sitzt.

☞ Make sure that the power cable is hooked tightly into the strain relief.



Gefahr!
Danger!



Vorsicht!
Caution!

Besondere Sorgfalt ist beim Verlegen des Netzkabels notwendig. Stellen Sie sicher, dass es nicht beschädigt ist und sich keine Schlaufen bilden! Das Netzkabel darf beim Umherfahren des Bettes nicht unter die Laufrollen geraten! Beim Verstellen des Bettes darf es sich nicht zwischen beweglichen Teilen verfangen!

Special care is to be taken when positioning the power cable. Make sure that the cable is not damaged and there is no loop in it! When moving the bed around, take care that the castors do not run over the power cable! When adjusting the bed the power cable should not get caught between moving parts!

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLUNGORT

LOCATION REQUIREMENTS

■ Für den gesamten Verstellbereich des Bettes muss ausreichend Platz vorhanden sein. Es dürfen sich keine Möbel, Fensterbänke usw. im Weg befinden.

■ There must be enough space available to be able to adjust the bed. No furniture, window sills and the like should be in the way.

■ The space under the bed must remain clear.

- Der Raum unter dem Bett muss frei bleiben.
- Prüfen Sie vor Einsatz auf Parkettböden, ob es durch die vorhandene Bodenversiegelung zu Verfärbungen durch die Laufrollen kommen kann. Der Einsatz auf Fliesen, Teppich, Laminat und Linoleum ist unbedenklich.

BURMEIER haftet nicht für Schäden, die durch alltäglichen Betrieb auf Fußböden entstehen könnten.

- Eine ordnungsgemäß installierte 230-Volt-Netzsteckdose muss (möglichst) in Nähe des Bettes vorhanden sein.
- Stellen Sie sicher, dass beim Anbringen weiterer Zusatzgeräte (z. B. Kompressoren von Lagerungssystemen usw.) die sichere Befestigung und Funktion aller Zusatzgeräte gegeben ist. Achten Sie hierbei besonders auf die sichere Verlegung aller beweglichen Anschlusskabel, Schläuche usw. Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich an die Hersteller der Zusatzgeräte oder an BURMEIER.



Gefahr!
Danger!



Warnung!
Warning!

Beachten Sie folgende Punkte bei der Aufstellung des Bettes, um mögliche Brandgefahren durch äußere Einflüsse so weit wie möglich zu minimieren. Weisen Sie die Anwender und das Fachpersonal auf diese Punkte hin!

- Verwenden Sie möglichst nur flammhemmende Matratzen und Bettzeug.
- Verwenden Sie nur zugelassene Matratzen (siehe Seite 61). Die Matratzen dürfen nur schwer entflammbar nach DIN 597 Teil 1 und 2 sein.
- Rauchen im Bett vermeiden, da je nach eingesetzten Matratzen und Bettzeug keine Beständigkeit gegen Raucherutensilien gegeben sein kann.
- Verwenden Sie nur technisch einwandfreie Zusatzgeräte (z. B. Heizdecken) und andere Elektrogeräte (z. B. Leuchten, Radios).

- Check before use on parquet flooring, that the castors do not cause discoloration of the varnish. Use on ceramic tiles, carpet, laminate and linoleum is harmless.

BURMEIER is not liable for any damage to floors due to daily operation.

- A properly installed 230 volt power outlet must be available, near the bed.
- Take care when attaching further accessory equipment (e.g. compressors for positioning systems, etc.) that their attachment is safe and their functionality is not impaired. Especially important is hereby also the safe placement of all moveable connecting cables, tubes, etc. If you have any further questions or need clarification contact the manufacturer of the accessory equipment or BURMEIER.

Observe the following points when setting up the bed to minimize possible fire hazard. Instruct the user and the authorized personnel in these points!

- If possible use only fire-retardant mattresses and bed sheets.
- Only use an authorized mattresses (see page 61). The mattress should be fire-retardant according to DIN 597 Section 1 and 2.
- Avoid smoking in bed because of the danger of fire.
- Use only technically faultless appliances (e.g. heating blankets) and other electronic devices (e.g. lamps, radios).
- Take care that these devices are only used for the purpose intended and that they cannot accidentally get on top of or underneath the bed sheets (Fire hazard because of overheating).



Gefahr!
Danger!



Warnung!
Warning!

- Stellen Sie sicher, dass diese Geräte nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwendet werden und Geräte nicht unbeabsichtigt auf oder unter das Bettzeug gelangen können (Brandgefahr infolge von Hitzestau).

- Vermeiden Sie unbedingt den Einsatz von Steckerkupplungen an Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosenleisten unter dem Bett (Brandgefahr infolge eindringender Flüssigkeiten).

- Schließen Sie das Bett direkt an eine Steckdose an. Verlängerungskabel und/oder Mehrfachsteckdosen sollten nicht verwendet werden.

- Absolutely avoid the use of extension cords or multi outlet extension cords under the bed (Leaking liquids can cause a fire hazard).

- Connect the bed directly to an electrical outlet. Do not use extension cords and/or multiple outlet extension cords.

ERREICHEN DER BETRIEBSBEREITSCHAFT

- Führen Sie nach erfolgter Montage des Bettes eine Überprüfung gemäß Kapitel 6 durch.

- Reinigen und desinfizieren Sie das Bett vor der Erstbenutzung und vor jedem Wiedereinsatz gemäß Kapitel 5.

Das Bett befindet sich nach erfolgreicher Durchführung und Beachtung aller Schritte der Seiten 17 bis 25 im betriebsbereiten Zustand.

REACHING OPERATIONAL READINESS

- After successful assembly, complete an inspection according to chapter 6.

- Clean and disinfect the bed before first time use and before every further use according to chapter 5.

After successfully completing and heeding all steps on page 17 through 25 the bed is now operationally ready.

DEMONTAGE

- ☞ Bremsen Sie die Laufrollen des Bettes.
- ☞ Entfernen Sie den Aufrichter.
- ☞ Fahren Sie das Bett in die höchste Position.
- ☞ Ziehen Sie die Stecker und die Zugentlastungen aus den Antriebsmotoren für Rückenlehne und Oberschenkellehne.
- ☞ Lösen Sie die beiden Rändelschrauben [i] und ziehen das Betthaupt Kopfteil zur Hälfte heraus.

DISASSEMBLY

- ☞ Lock the castors of the bed.
- ☞ Remove the trapeze pole.
- ☞ Raise the bed to its highest position.
- ☞ Remove the plug and strain relief from the drive motors for the backrest and thigh rest.
- ☞ Loosen both knurled screws [i] and pull the end board/head section out halfway.
- ☞ Remove the four side rail beams.

- ☞ Entfernen Sie die vier Seitengitterholme.
- ☞ Senken Sie die Metallzapfen **[j]** für die Seitengitter ab.
- ☞ Nehmen Sie das Betthaupt Kopfteil vom Liegeflächenrahmen ab.
- ☞ Lösen Sie die beiden Rändelschrauben **[i]** am Fußende und ziehen das Betthaupt Fußteil ab.
- ☞ Schrauben Sie die vier Rändelschrauben **[i]** wieder fest, damit sie nicht verloren gehen.
- ☞ Schrauben Sie beide Rändelschrauben **[c]** an den Halteböcken heraus.
- ☞ Lösen Sie die beide Rändelschrauben **[a]** und nehmen Sie den Liegeflächenrahmen vom Untergestell.
- ☞ Schrauben Sie die zwei Rändelschrauben **[a]** wieder fest, damit sie nicht verloren gehen.
- ☞ Schrauben Sie die Halteböcke wieder an ihren Platz am Liegeflächenrahmen.
- ☞ Fahren Sie das Untergestell in die niedrigste Position.
- ☞ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdos.
- ☞ Sichern Sie die Kabel am Untergestell mit Kabelbindern, damit sie nicht beschädigt werden.
- ☞ Lower the metal pins **[j]** for the side rails.
- ☞ Remove the end board/head section from the reclining surface frame.
- ☞ Loosen both knurled screws **[i]** at the foot end and pull off the end board/foot section.
- ☞ Tighten the four knurled screws **[i]** again so that they are not lost.
- ☞ Remove both knurled screws **[c]** from the frame connectors.
- ☞ Loosen both knurled screws **[a]** and take the reclining surface frame from the base frame.
- ☞ Tighten the two knurled screws **[a]** again so that they are not lost.
- ☞ Reconnect the frame connectors in position on the reclining surface frame.
- ☞ Lower the base frame to its lowest position.
- ☞ Remove the power plug from the wall socket.
- ☞ Secure the cables to the base frame with cable ties so that they are not damaged.



SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE ZUM ANTRIEBSSYSTEM

- Sorgen Sie dafür, dass bei den Verstellvorgängen keine Gliedmaßen vom Patienten, Anwender und weiteren Personen, insbesondere anwesenden Kindern, durch die Lehnen oder den Bettenrahmen eingeklemmt oder verletzt werden können.
- Sperren Sie zum Schutz des Patienten, vor ungewollten Verstellvorgängen, immer die elektrische Verstellung von Rücken- und Oberschenkellehne am Handschalter, wenn die Seitengitterholme angestellt sind (Quetschgefahr von Gliedmaßen beim Verstellen von Rücken- und Oberschenkellehne).
- Bei Einsatz von Zubehörteilen am Bett gilt: Durch Anordnung dieser Zubehörteile dürfen beim Verstellen von Rücken- und Oberschenkellehne keine Quetsch- oder Scherstellen für den Patienten entstehen. Falls dieses nicht gewährleistet werden kann, muss der Anwender die Verstellung der Rücken- und Oberschenkellehne, durch den Patienten, sicher unterbinden.
 - ▶ Bringen Sie deshalb den Handschalter außerhalb seiner Reichweite an (z. B. am Fußende) oder sperren Sie die Verstellmöglichkeiten am Handschalter.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netz- und Handschalterkabel nicht eingeklemmt oder sonst wie beschädigt werden kann.



- Stellen Sie vor jedem Umherfahren des Bettes sicher, dass das Netzkabel nicht gedehnt, überfahren oder sonst wie beschädigt werden kann.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE DRIVE UNIT

- Take care that any adjustments of the bed no limbs of patient, user, and any other persons, especially children can be jammed and injured by getting under the moveable parts or the bed frame.
- For the safety of the patient, lock the hand switch operation of adjustments to the back and thigh rests to avoid unwanted adjustments when the side rail beams are up. (Danger of getting limbs trapped when adjusting the back- and thigh rests).
- When using accessories with the bed it is necessary to: make sure that the arrangement of these accessories will not cause any places that might squeeze or hurt the patient. If this is not the case the operator must safely disable the adjustment function of the back- and thigh rests.
 - ▶ To do so place the hand switch out of the patient's reach (e.g. foot section) or lock the adjustment functions on the hand switch.
- Make sure that the power and hand switch cable cannot be jammed or in other ways be damaged.

- Make sure that before relocating the bed, the power cable cannot be stretched, rolled over or in any other way be damaged.



Vorsicht!
Caution!

- Ziehen Sie das Netzkabel bei jedem lokalen Standortwechsel aus der Steckdose und hängen Sie es in den Netzkabelhalter.
- Stellen Sie sicher, dass bei den Verstellvorgängen keine Hindernisse wie Möbel oder Dachschrägen im Weg stehen. So vermeiden Sie Beschädigungen.

- With every relocation, pull the power cable out off the wall socket and hang it in the power cable holder.
- Make sure that when adjusting the bed no obstacles such as furniture or slanted ceilings are in the way. This will prevent damage.



Wichtig!
Important!

- ◆ Eine elektronische Überlast-Erkennung bewirkt, dass bei zu großer Last die Zentrale Steuereinheit abgeschaltet wird. Nach Beseitigung der Überlast arbeitet das Antriebssystem, bei erneutem Tastendruck auf dem Handschalter, wieder.
- ◆ Eine Dauerbetriebszeit von 2 Minuten darf nicht überschritten werden! Danach eine Mindestpause von 18 Minuten einhalten. Ebenfalls möglich: 1 Minute Dauerbetrieb und 9 Minuten Pause.
- ◆ Wenn die maximale Dauerbetriebszeit nicht beachtet wird (z. B. durch andauerndes "Spielen" am Handschalter), schaltet ein thermisches Sicherheitsbauteil die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen ab. Je nachdem wie groß die Überlastung war, kann es einige Minuten dauern, bis Sie dann wieder weitere Verstellvorgänge durchführen können.
- ◆ Der Verstellbereich aller Funktionen ist elektrisch/mechanisch nur innerhalb der eingestellten Grenzen möglich.
- ◆ Trotz Einhaltung aller vorgeschriebenen Grenzwerte können, wie bei jedem elektrischen Gerät, Störeinflüsse von und auf andere nahe benachbarte Elektrogeräte nicht ganz ausgeschlossen werden (z. B. "Knistern" im Radio). Vergrößern Sie in solchen seltenen Fällen den Geräteabstand; verwenden Sie nicht die gleiche Steckdose oder schalten Sie das störende/gestörte Gerät vorübergehend aus.

- ◆ An electronic overload detector switches off the central control unit, when the load is too great. After clearing the overload and pressing the hand switch again the central control unit will work again.
- ◆ A continuous run time of 2 minutes should not be exceeded. Afterwards a pause of no less than 18 minutes should be observed. Another possibility: 1 minute continuous run time and 9 minutes pause.
- ◆ If the maximum continuous run time is not heeded (e.g. by constantly "playing" with the hand switch) a thermal safety component switches off the power for safety reasons. Depending on how large the over-load was, it can take several minutes before any more adjustments can be made.
- ◆ The adjustable range of every function is electrically/mechanically only within a predetermined range possible.
- ◆ Electrical disturbances affecting other nearby electronic appliances (e.g. crackling on the radio) cannot be excluded, despite adherence to all prescribed regulations. In such rare circumstances increase the distance between the appliances, do not use the same power socket or switch the affected appliance off for a while.

HANDSCHALTER

Die elektrischen Verstellvorgänge lassen sich mit dem Handschalter [13] steuern.

Der Verstellbereich aller Funktionen ist elektrisch/mechanisch innerhalb der zulässigen Bereiche begrenzt.

Aus Sicherheitsgründen sind im Handschalter Sperrfunktionen eingebaut. Verstellvorgänge können damit zum Schutz des Patienten am Handschalter gesperrt werden, wenn es der klinische Zustand des Patienten aus Sicht des behandelnden Arztes erfordert.

- ◆ Der Handschalter lässt sich mit seinem elastischen Haken am Bett einhängen.
- ◆ Das Spiralkabel ermöglicht große Bewegungsfreiheit.
- ◆ Der Handschalter ist wasserdicht und abwaschbar.

HAND SWITCH

The electrical adjustments can be made using the hand switch [13].

The adjustable range of every function is electrically/mechanically only within a predetermined range possible.

Locking mechanisms have been built into the hand switch for safety reasons. For the safety of the patient, adjustment functions can be locked at the hand switch, if, from a clinical point of view and with the approval of the attending physician, the condition of the patient warrants it.

- ◆ The hand switch, with its elastic hook can be hooked onto the bed.
- ◆ The spiral cable allows for freedom of movement.
- ◆ The hand switch is water-tight and washable.

Rückenlehne
Backrest

Höhe der Liegefläche
Height of reclining surface

Oberschenkellehne
Thigh rest



BEDIENUNG DES HANDSCHALTERS

- Weisen Sie den Patienten in die Funktionen des Handschalters ein!
- Die Antriebsmotoren laufen so lange, wie die entsprechende Taste gedrückt wird.
- Die Verstellmöglichkeiten sind in beide Richtungen möglich.

- Grundsätzlich gilt bei den Tasten:

- ▲ Heben
- ▼ Senken

OPERATING THE HAND SWITCH

- Train the patient in the functions of the hand switch.
- The drive motors will run as long as the button is held down.
- The adjustment functions can be used in both directions.

- Basically the functions of the buttons are as shown:

- ▲ Raise
- ▼ Lower



Verstellen der Rückenlehne

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie den Anstellwinkel der Rückenlehne verstellen wollen.

Adjusting the backrest

Push this button to adjust the backrest angle.



Verstellen der Liegeflächenhöhe

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie die Höhe der Liegefläche verstellen wollen.

Adjusting the reclining surface height

Push this button to adjust the height of the reclining surface.



Verstellen der Oberschenkellehne

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie den Anstellwinkel der Oberschenkellehne verstellen wollen.

Adjusting the thigh rest

Push this button to adjust the thigh rest angle.

SPERRFUNKTION



Die Bedienung der Sperrfunktion ist ausschließlich den Anwendern gestattet!

Ist der klinische Zustand des Patienten so kritisch, dass für ihn eine Gefahr durch das Verstellen des Bettes mittels Handschalter besteht, muss der Anwender diesen umgehend sperren. Das Pflegebett verbleibt in der Position zur Zeit des Abschaltens.

LOCKING FUNCTION

Only the operator is authorized to use the locking function!

In case the clinical condition of the patient is so critical that any adjustment of the bed by means of the hand switch causes danger, the operator must disable the bed immediately. The nursing bed remains in the position it had at the time of disconnecting.



Drehen Sie den Sperrschlüssel nicht mit Gewalt über den Anschlag des Sperrschlosses hinaus! Das Sperrschloss oder der ganze Handschalter kann beschädigt werden.

Do not turn the locking key with force over the stop of the lock! The lock or the whole hand switch can be damaged.



Der Sperrschlüssel befindet sich bei Auslieferung des Bettes, mit einem Kabelbinder befestigt, am Handschalter. Der Sperrschlüssel ist nicht für die Verwendung durch den Patienten vorgesehen. Der Sperrschlüssel muss vom Handschalter entfernt werden. Der Anwender oder eine vom Arzt beauftragte Person sollte den **Sperrschlüssel** in Verwahrung nehmen.

The locking key is delivered attached to the bed with a cable tie on the hand switch. The locking key is not intended for use by the patient. It must be removed from the hand switch. The operator or a person authorized by the physician should keep the **locking key**.

■ Drehen Sie das jeweilige Sperrschloss auf dem Handschalter mit dem Sperrschlüssel im

■ Turn the respective lock on the hand switch with the locking key clockwise in the locking position.



Uhrzeigersinn in die zu sperrende Position.
Die Farbe der jeweiligen Anzeige ändert sich von grün auf gelb.

The color of the respective display will change from green to yellow.



Antrieb freigegeben:

Sperrschloss steht senkrecht

Farbe der Anzeige: **grün**

Tasten lassen sich betätigen ("Klick-Geräusch")

Drive enabled

Lock is vertical

Color of the display is: **green**

Buttons can be pushed ("Clicking sound")

Antrieb gesperrt:

Sperrschloss steht im Uhrzeigersinn um ca. 15° gedreht

Farbe der Anzeige: **gelb**

Tasten sind gesperrt

Drive disabled

Lock has been turned clockwise by about 15°

Color of the display is: **yellow**

Buttons cannot be pushed

LAUFROLLEN

Das Bett steht auf vier lenkbaren Laufrollen [11], die alle mit einer Feststellbremse ausgestattet sind.

☞ **Bremsen:** Tritthebel mit dem Fuß nach unten treten.

☞ **Fahren:** Tritthebel mit dem Fuß in Richtung Standrohr treten.

CASTORS

The bed stands on four steerable, individual locking castors [11].

☞ **Locking:** Push the foot lever down.

☞ **Unlocking:** Push the foot lever toward the corner pole.



■ Fahren Sie das Bett nur umher, wenn sich die Liegefläche in tiefster Position befindet.

■ Stellen Sie vor jedem Umherfahren des Bettes sicher, dass das Netzkabel in den dafür vorgesehenen Netzkabelhalter eingehängt ist.

■ Relocate the bed only when it is in the lowest position.

■ Make sure the power cable is secured in the provided power cable holder, before moving the bed.

NETZKABELHALTER

Der Netzkabelhalter befindet sich seitlich am Liegeflächenrahmen im Bereich des Fußteils.


POWER CABLE HOLDER

The power cable holder is located sideways on the reclining surface frame near the foot section.



■ Das Netzkabel muss vor jedem Umherfahren des Bettes in den Netzkabelhalter eingehängt werden, sonst können durch Abreißen, Überfahren, Abquetschen Schäden am Netzkabel auftreten. Diese Beschädigungen können zu elektrischen Gefährdungen und Funktionsstörungen führen.

■ The power cable must be secured in the power cable holder provided, before moving the bed, otherwise it might be damaged by stretching, by running over and squeezing.

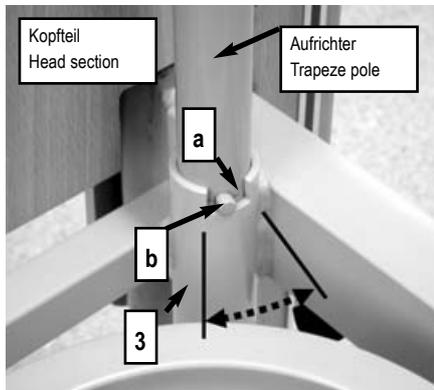

AUFRICHTER

Ein am Bett angebrachter Aufrichter ermöglicht dem Patienten ein leichteres Ein- und Aussteigen.

Die maximale Tragfähigkeit des Aufrichters beträgt an seinem vorderen Ende 75 kg.

Der Aufrichter sollte nicht für Rehabilitationsübungen verwendet werden.

In den beiden Ecken des Liegeflächenrahmens, an der Kopfseite, befinden sich zwei runde Aufrichterhülsen [3]. Die Aufrichterhülsen haben an der Oberseite eine Aussparung [a], die zusammen mit dem Stift [b] den Schwenkbereich des Aufrichters begrenzen. Der Aufrichter sollte auf der Seite des Bettes angebracht werden, wo der Patient ein- und aussteigt.

TRAPEZE POLE

The trapeze pole attached to the bed makes it easier for the patient to get into and out of bed.

The maximum load of the trapeze pole is 75 kg at the front end.

Do not use the trapeze pole for rehabilitation training.


In both corners of the head section of the reclining surface frame are two trapeze pole sockets [3]. The trapeze pole sockets have a notch at the top [a], which together with the metal pin [b] restricts the swivel range of the trapeze pole. The trapeze pole should be installed on the side where the patient gets in and out of bed.

Attaching

☞ Insert the trapeze pole into the socket. The metal pin [b] must be in the notch [a] of the socket.

Removal

☞ Pull the trapeze pole straight up out of the socket.

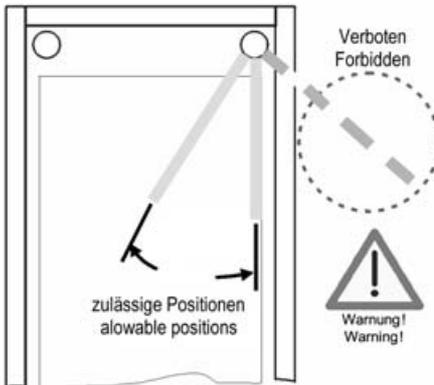

Anbringen

☞ Den Aufrichter in die Hülse stecken. Der Metallstift [b] muss sich in der Aussparung [a] der Hülse befinden.

Entfernen

☞ Den Aufrichter gerade nach oben aus der Hülse herausziehen.

Schwenkbereich des Aufrichters

Den Aufrichter nicht außerhalb des Bettes schwenken. Es besteht Gefahr, dass das Bett durch Zug am Aufrichter umkippt.

Der Metallstift des Aufrichters muss sich immer in der Aussparung befinden.

Trapeze pole swivel range

Do not swivel the trapeze pole outside of the bed. There is a danger that through the pull, the bed will tip over.

The metal pin must always be in the notch of the socket.



TRIANGELGRIFF

Am Aufrichter lässt sich ein Triangelgriff (Haltegriff) befestigen. An diesem Triangelgriff kann sich der Patient aufrichten und sich so leichter in eine andere Position bringen.

Kontrollieren Sie den Triangelgriff und das Gurtband regelmäßig auf Beschädigungen (siehe Kapitel 6). Ein beschädigter Triangelgriff oder beschädigtes Gurtband sind umgehend auszutauschen.



**Wichtig!
Important!**

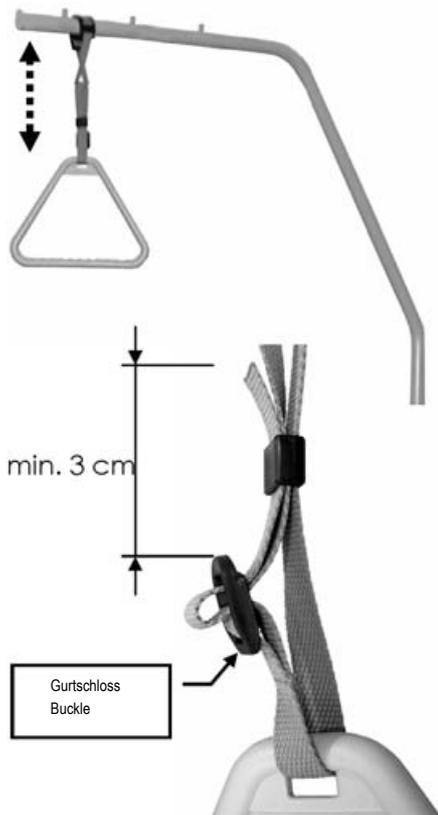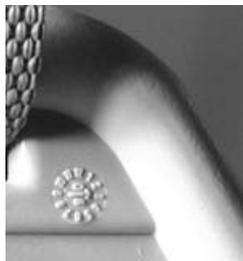

Haltbarkeit

Auf dem Triangelgriff befindet sich eine Datumsuhr. Der Triangelgriff hat bei normalem Gebrauch eine Haltbarkeit von mindestens fünf Jahren. Danach ist regelmäßig eine Sichtprüfung durchzuführen, um festzustellen, ob ein weiterer Einsatz zulässig ist.

Verstellbereich des Haltegriffes

Die Höhe des Haltegriffes lässt sich durch das verstellbare Gurtband im Bereich von ca. 55 cm bis 70 cm (gemessen ab Oberkante Matratze) anpassen.

- ☞ Schieben Sie die feste Schlaufe des Triangelgriffes über den ersten Bolzen des Aufrichters.
- ☞ Prüfen Sie durch festes Ziehen des Triangelgriffes nach unten dessen sicheren Halt.

Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit des Aufrichters beträgt am vorderen Ende 75 kg.

- Der Triangelgriff lässt sich mittels Gurtband in der Höhe verstellen.
- Achten Sie darauf, dass das Gurtband korrekt durch das Gurtschloss eingefädelt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Ende des Gurtbandes mindestens 3 cm über das Gurtschloss übersteht.

TRAPEZE

A trapeze (grab handle) can be attached to the trapeze pole. The patient can hold on to the trapeze to make it easier to change to a different position.

Regularly check the trapeze at the strap for any damage (see Chapter 6). A damaged trapeze or strap must immediately be exchanged.

Durability

There is a date marker on the trapeze. With normal use the trapeze will last for at least five years. Afterwards a sight check is to be performed periodical to determine if further use is permissible.

Adjustable range of the trapeze

The height of the trapeze can be adjusted by means of the strap to accommodate a range of about 55 cm to 70 cm (measuring from the top of the mattress).

- ☞ Push the loop of the trapeze over the first stud of the patient grab handle pole.
- ☞ Test by tightly pulling the trapeze downward that it is secure.

Useful Tip: The maximum lifting load of the trapeze pole is 75 kg at the front end.

- The height of the trapeze can be adjusted by means of the strap.
- Make sure the the strap is fed correctly through the buckle.
- Make sure that the end of the strap is at least 3 cm above the buckle.

UNTERSCHENKELLEHNE


Bei angestellter Oberschenkellehne kann die Unterschenkellehne [7] individuell eingestellt werden. Zu dem Zweck befinden sich unter der Unterschenkellehne zwei rastbare Verstellbeschläge, die die Unterschenkellehne in ihrer Position arretieren.

Anheben

☞ Heben Sie die Unterschenkellehne am Fußende - nicht an den Matratzenbügeln - bis zur gewünschten Position hoch. Die Unterschenkellehne rastet selbsttätig ein.

Absenken

- ☞ Heben Sie die Unterschenkellehne erst bis zum oberen Anschlag an.
- ☞ Senken Sie die Unterschenkellehne langsam ab.

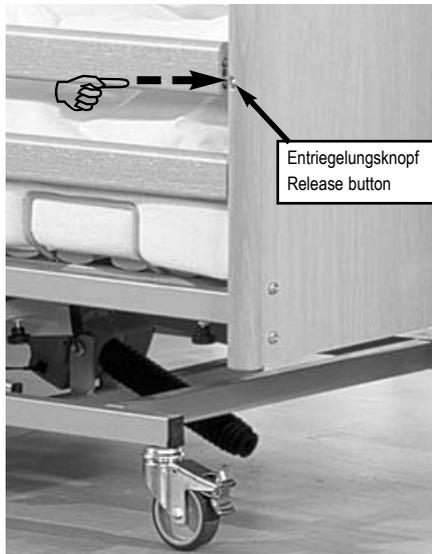

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn die Unterschenkellehne ungebremst abstürzt.

Wird die Oberschenkellehne abgesenkt, senkt sich die Unterschenkellehne automatisch mit ab.

SEITENGITTER

Seitengitter sind ein geeigneter Schutz für Patienten gegen ungewolltes Herausfallen aus dem Bett. Sie sind jedoch nicht dazu geeignet, ein beabsichtigtes Verlassen des Bettes zu verhindern.

Anstellen

☞ Ziehen Sie die Seitengitterholme [5] jeweils an einem Ende nacheinander hoch, bis sie in der obersten Stellung an beiden Enden einras-

LOWER LEG REST

When the thigh rest is fixed, the lower leg rest [7] can be individually adjusted. For this reason there are two adjusting ratchets, which will lock the lower leg rest into position.

Raising

☞ Raise the lower leg rest on the foot end - not with the mattress brackets - up to the desired level. The lower leg rest will automatically snap into place.

Lowering

- ☞ First lift the lower leg rest all the way to the stopping point.
- ☞ Slowly lower the lower leg rest.

There is a potential for injury if the lower leg rest falls straight down.

If you lower the thigh rest, the lower leg rest will be lowered automatically.

SIDE RAILS

Side Rails conveniently prevent the patient from falling out of bed accidentally. They do not, however, prevent a patient from leaving the bed.

Engaging

☞ Pull the side rail beams [5] on one end after the other until it locks in its highest position. You should not be able to move them up or down.

ten. Ein Verschieben nach oben oder unten darf nicht möglich sein.

☞ Prüfen Sie das Einrasten durch Druck auf die Seitengitterholme von oben.

Absenken

☞ Heben Sie die Seitengitterholme etwas an.

☞ Drücken Sie den Entriegelungsknopf **[10]** und senken Sie die Seitengitterholme langsam ab.

☞ Check that the side rail beams are locked into place by pushing on them from above.

Disengaging

☞ Lift the side rail beams slightly.

☞ Push the release button **[10]** and slowly lower the side rail beams.



Spezielle Sicherheitshinweise bei Benutzung von Seitengittern :

■ Verwenden Sie nur technisch einwandfreie, unbeschädigte Seitengitter mit zugelassenen Spaltmaßen, die sicher einrasten.

■ Stellen Sie sicher, dass nur geeignete Original BURMEIER-Seitengitter eingesetzt werden, die als Zubehör von uns für das jeweilige Bettenmodell freigegeben oder bereits im Bett integriert sind.

■ Beurteilen und berücksichtigen Sie vor dem Einsatz von Seitengittern den klinischen Zustand und die Besonderheiten beim Körperbau des jeweiligen Patienten:

▶ Ist der Patient z. B. sehr stark verwirrt oder sehr unruhig, verzichten Sie möglichst auf Seitengitter und greifen Sie zu alternativen Sicherungsmaßnahmen wie Fixiergurte, Bett-schürzen usw.

▶ Bei besonders kleinen, schwächtigen Patienten ist gegebenenfalls ein zusätzlicher Schutz zur Verringerung der Seitengitter-Spaltabstände erforderlich. Verwenden Sie dann z. B. Schutzpolster (Zubehör, siehe Kapitel 8), Fixiergurte usw.

Nur so ist eine wirksame sichere Schutzfunktion gewährleistet. Die Gefahr von Einklemmen und Durchrutschen des Patienten wird verringert.

■ Verwenden Sie nur zugelassene Matratzen (siehe Seite 61). Die Matratzen dürfen nur

Special safety notes for use of side rail beams

■ Only use safely lockable, technically perfect, undamaged side rail beams with proper gap dimensions

■ Make certain that only suitable Original BURMEIER-side rail beams are used, which have been approved for use with the bed model you are using or that are already integrated in the bed.

■ Before using side rail beams evaluate and take into account the clinical condition and any special problems of the patient

▶ If, for example, the patient is very bewildered or very anxious, forgo the side rails and use alternative safety measures such as a restraining belt or restraint sheets.

▶ For especially small, frail patients, additional protective measures for reducing the distance between bars on the side rails may be necessary. In these cases use, for example side rails foam covers (accessories, see chapter 8), retraining belts, etc.

This will effectively ensure patient safety by reducing the risk of becoming trapped or slipping through.

■ Only use an authorized mattresses (see page 61). The mattress should be fire-retardant according to DIN 597 Section 1 and 2.

■ If elevated patient positioning systems are employed, such as antidecubitus mattresses



schwer entflammbar nach DIN 597 Teil 1 und 2 sein.

- Werden erhöhte Lagerungssysteme wie z. B. Anti-Dekubitus-Matratzen eingesetzt, muss die wirksame Höhe der Seitengitter von mindestens 22 cm über der unbelasteten Matratze gewährleistet sein. Wird dieses Maß nicht eingehalten, müssen geeignete Maßnahmen zum Schutz des Patienten getroffen werden. Dies wird durch einen Aufsatz auf die Seitengitter erreicht (Zubehör).

- Die für die Befestigung sorgenden mechanischen Teile am Bettgestell und am Seitengitter sind regelmäßig auf etwaige Beschädigungen zu prüfen. Dies sollte nicht nur vor dem Anbringen eines Seitengitters erfolgen, sondern auch während des Gebrauchs in kürzeren Abständen (zumindest vor jedem Neueinsatz).

- Sperren Sie bei elektrisch verstellbaren Betten, zum Schutz des Patienten vor ungewollten motorischen Verstellungen, immer die elektrische Verstellung von Rücken- und Oberchenkellehne am Handschalter, wenn die Seitengitter angestellt sind. Es besteht sonst Quetschgefahr von Gliedmaßen beim Verstellen von Rücken- und Oberschenkellehne.

- Stellen Sie vor dem Absenken der Seitengitterholme sicher, dass sich keine Gliedmaßen des Patienten im Bewegungsbereich der Holme befinden. So vermeiden Sie Quetschungen und Verletzungen.

Werden diese Sicherheitshinweise nicht beachtet, droht die Gefahr des Einklemmens im Seitengitter und des Herausfallens durch zu große Spaltmaße infolge von Beschädigungen, der Verwendung ungeeigneter Seitengitter oder des unvollständigen Einrastens der Seitengitter.

ses, an effective side rails height of at least 22 cm above the unweighted mattresses must be ensured. If this requirement is not met, the operator must take suitable measures to safeguard the patient. This can be done by using an attachable bar for side rails (Accessory)

- The mechanical parts on the bed frame and the side rails which serve to protect the patient must be regularly examined for damage. This should not only happen before the installation of the side rail but also during use in shorter intervals (at least before every new assignment).

- To safeguard the patient against unintentional adjustments, always lock the electrical adjustment of the back- and thigh rests on electrical beds when the side rails are raised. Otherwise there is a risk of trapping limbs when the back- and thigh rest are adjusted.

- Before lowering the side rail beams make sure that the patient's limbs are clear of the side rail beams. This way you can avoid injuring the patient.

If these safety warnings are not observed there is a danger for the patient of being injured by the side rails, of falling out of bed because of too large a distance between the bars or because of damage, the use of unsuitable side rails or the incomplete locking of the side rail.

NOTABSENKUNG DER RÜCKENLEHNE

Bei Ausfall der Stromversorgung oder des elektrischen Antriebssystems lässt sich die angeestellte Rückenlehne von Hand notabsenken.



Hierzu sind unbedingt zwei Anwender erforderlich!



Nichtbeachten dieser Sicherheits- und Gebrauchshinweise kann durch unkontrolliertes Abstürzen der Rückenlehne zu schweren Verletzungen bei Anwender und Patienten führen!

Diese im äußersten Notfall anzuwendende Notabsenkung darf nur von Anwendern durchgeführt werden, welche die nachfolgend beschriebene Bedienung sicher beherrschen.

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Notabsenkung unter Normalbedingungen mehrfach zu üben. So können sie im Notfall schnell und richtig reagieren.

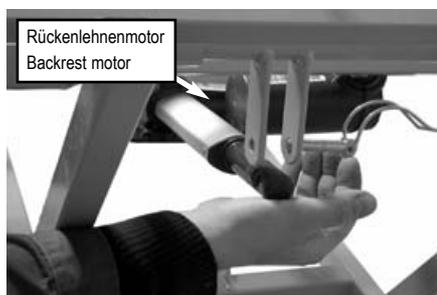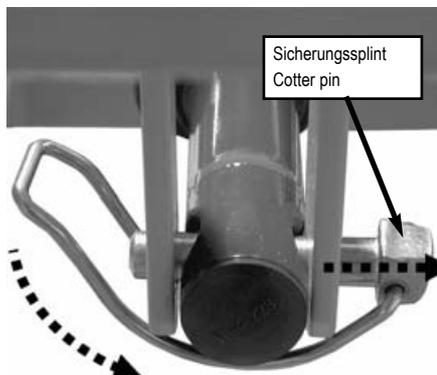

☞ Entlasten Sie die Rückenlehne vor dem Notabsenken.

☞ Der erste Anwender hebt die Rückenlehne am äußeren Rand, am Kopfteil leicht an und hält sie in dieser Stellung fest.

☞ Der zweite Anwender entfernt nun den Sicherungssplint. Schwenken Sie dafür den Klemmbügel weg und ziehen den Sicherungssplint mitsamt dem Klemmbügel aus der Hubstange des Rückenlehnenmotors heraus.

☞ Der Motor ist nun von der Rückenlehne getrennt und fällt nach unten weg.

☞ Nun senkt der erste Anwender die Rückenlehne vorsichtig ab.

EMERGENCY LOWERING OF THE BACK REST

The upright back rest can be lowered manually in case of a power outage or failure of the power supply or the electrical drive systems.

In this case two users are absolutely necessary!

Disregarding these safety guidelines and instructions may cause the backrest to fall out of control, which could lead to serious injuries for the user and the patient!

Emergency lowering may only be carried out in the case of extreme emergency and by users who have a complete command of the procedures below.

We strongly advise you to practice emergency lowering of the backrest under normal conditions so that in case of an emergency you will be able to react quickly and properly.

☞ Before the emergency lowering, ease the load on the backrest.

☞ The first user raised the back rest slightly by the outside edge of the head section and holds it in this position.

☞ The second user now removes the cotter pin. To do this swing away the clamping yoke and pull the cotter pin along with the clamping yoke out of the connecting mount of the back rest motor.

☞ The motor has now been detached from the back rest and swings down.

☞ Now the first user carefully lowers the back rest.



Wenn die Rückenlehne ungebremst abstürzt, können der Patient und/oder der zweite Anwender verletzt werden!

Um das Bett wieder in den Originalzustand zu versetzen:

☞ Hubstange wieder hochschwenken und mit dem Sicherungssplint an der Aufnahme sichern und den Klemmbügel umlegen.

Führen Sie den Sicherungssplint von der Seite des Oberschenkellehnenmotors ein.

If the back rest falls out of control, the patient and the second user may be injured!

To convert the bed back to its normal operating state:

☞ Swing up the connecting mount and secure the cotter pin, then turn over the clamping yoke.

Insert the cotter pin from the side of the drive motor thigh rest.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

ALLGEMEINES

Die Reinigung ist die wichtigste Maßnahme und Voraussetzung einer erfolgreichen chemischen Desinfektion.

Im Allgemeinen ist eine routinemäßige Reinigung des Bettes, bei Benutzung durch denselben Patienten, hygienisch ausreichend.

Eine Desinfektion des Bettgestells ist nur im Falle einer sichtbaren Kontamination mit infektiösem oder potentiell infektiösem Material (Blut, Stuhl, Eiter) oder bei Vorliegen einer Infektionserkrankung auf Anordnung des Arztes erforderlich.

Das Bett muss bei einem Patientenwechsel zuvor gereinigt und wischdesinfiziert werden!



Vorsicht!
Caution!

Beachten Sie vor Beginn der Reinigungsarbeiten:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und bewahren Sie ihn so auf, dass er nicht mit übermäßig viel Wasser oder Reinigungsmittel in Berührung kommt (in Plastikbeutel legen).
- Stellen Sie sicher, dass alle Stecker am Zentralen Steuergerät und den Antriebsmotoren vorschriftsmäßig eingesteckt sind.
- Keines der elektrischen Bauteile darf eine äußere Beschädigung aufweisen; sonst kann Wasser oder Reinigungsmittel eindringen. Dies kann zu Funktionsstörungen, Beschädigungen der elektrischen Bauteile führen.
- Stellen Sie vor erneuter Inbetriebnahme sicher, dass keine Restfeuchtigkeit an den elektrischen Kontakten verbleibt. Dieses

CLEANING AND DISINFECTING

GENERAL

Cleaning is the most important requirement for a successful chemical disinfection.

Generally a routine cleaning of the bed, if used by the same patient, is hygienically sufficient

Disinfection of the bed frame is only necessary in case of visible contamination with infectious or potentially infectious material (blood, stool, pus) or by presence of an infectious disease under the direction of a physician.

The bed must be cleaned and washed down with disinfectant in case of a patient change!

Before beginning the cleaning, please note:

- Unplug the power cable from the wall socket and store it in such a way that it does not come into excessive contact with water or other cleaning solutions (store in plastic bag).
- Make sure all plugs at the central control unit and the drive motors are properly connected.
- None of the electrical components must show any visible damage; otherwise water or cleaning solution could penetrate. This could lead to malfunction or damage to the electrical components.
- Before operating the bed again, make sure that there is no residual moisture on the electrical contacts, by drying or blowing on the power plug.



geschieht durch Abtrocknen oder Ausblasen des Netzsteckers.

- Die elektrischen Komponenten dürfen keinem Wasserstrahl, keinem Hochdruckreiniger oder Ähnlichem ausgesetzt werden! Reinigung nur mit feuchten Tüchern!
- Besteht der Verdacht, dass Wasser oder sonstige Feuchtigkeit in elektrische Komponenten eingedrungen sind, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose bzw. stecken Sie diesen nicht erneut in die Steckdose. Kennzeichnen Sie das Bett deutlich als "Defekt" und nehmen Sie das Bett außer Betrieb. Melden Sie das umgehend dem zuständigen Betreiber.
- Werden diese Vorschriften nicht eingehalten, sind erhebliche Schäden am Bett und seinen elektrischen Aggregaten und Folgefehler nicht auszuschließen!

■ The electrical components must not be cleaned with a water jet, a high pressure cleaner or other similar device!
Clean only with a moist towel.

■ If you suspect that water or any other form of moisture has penetrated the electrical components, pull the power plug out of the wall socket immediately. If already disconnected from the power supply, make sure it is not plugged in again. Clearly mark the nursing bed as "Defective" and take it immediately out of service. Report this to the operator promptly.

■ Failure to follow these directions could lead to major damage of the bed and its electrical components and lead to subsequent malfunctions.

REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSPLAN

- Ziehen Sie die Bettwäsche ab und geben Sie diese zur Wäsche.
- Reinigen Sie alle Oberflächen einschließlich der Lattenroste und die Liegefläche aus Kunststoffeinsätzen oder Drahtgitterböden mit einem milden und umweltverträglichen Reinigungsmittel. Gleiches gilt für den Handschalter.
- Wenn das Bett mit sichtbaren Kontaminationen z.B. infektiösem oder potentiell infektiösem Material verunreinigt ist, müssen Sie das Bett nach der Reinigung wischdesinfizieren. Benutzen Sie für die jeweilige Oberfläche geeignete Desinfektionsmittel, entsprechend den gelisteten Produkten der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie). Gleiches gilt für alle Betten von Patienten mit melde-

CLEANING AND DISINFECTION PLAN

- Remove the bed sheets and give them to the laundry.
- Clean all surfaces including the slatted boards and the reclining surface made of plastic inserts or wire mesh base with a mild and environmentally safe cleaning solution. This also applies to the hand switch.
- If the bed has visible contamination e.g. infectious or potentially infectious material have polluted if, it must be disinfected by wiping after cleaning. Use approved disinfectants for each surface according to the products listed by the DGHM (German Organization for Hygiene and Microbiology). This also applies to all beds from patients with illnesses subject to report according to §6 of the infection control law (*German abbreviation: IfSG, Protection against Infection*

pflichtigen Erkrankungen nach § 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Besiedlungen oder Infektionen mit multiresistenten Erregern (z. B. MRSA, VRE) und alle Betten von Intensiv- und Infektionsstationen. Dabei müssen die in der DGHM-Liste angegebenen Konzentrationen beachtet werden.

■ Eine Desinfektion der Laufrollen ist nur bei sichtbarer Kontamination mit infektiösem oder potentiell infektiösem Material erforderlich.

Hinweis: Eine laufende Desinfektion ist nur bei Patienten mit einem multiresistenten Erreger (z. B. MRSA) innerhalb einer Krankenanstalt erforderlich.

Act), colonization or infection with treatment resistant pathogens (e.g. MRSA, VRE) and all beds from the intensive care and infection control units. Use only the DGHM approved disinfectant in the approved concentration.

■ Disinfecting the castors is only necessary when visibly contaminated by infectious or potentially infectious material.

Notice: Continuous disinfection is only necessary for patients with a treatment resistant pathogen (e.g. MRSA) within the hospital.

EINWEISUNG DER ANWENDER UND DES FACHPERSONALS

Um die richtige Vorgehensweise bei der Reinigung und Desinfektion sicherzustellen, empfehlen wir, eine entsprechende Einweisung der Anwender und des Fachpersonals durchzuführen. Dabei ist zu vermitteln, dass folgende Punkte zu beachten sind:

■ Das saubere Bett ist so in die Wohnung des Patienten zu transportieren, dass es zwischenzeitlich nicht verschmutzt oder kontaminiert werden kann.

■ Bei der Demontage des Bettes empfehlen wir, dieses unverzüglich zu reinigen und zu wischdesinfizieren. Das Fachpersonal sollte über die Besonderheiten beim Reinigungs- und Desinfektionsverfahren informiert sein und die Aufbereitung entsprechend zuverlässig durchführen (Vorgabe der Arbeitsabläufe bzw. der einzelnen Arbeitsschritte durch den Betreiber). Dabei ist darauf zu achten, dass nur DGHM-gelistete Desinfektionsmittel in den dort angegebenen Konzentrationen verwendet werden.

INSTRUCTING THE USER AND QUALIFIED PERSONNEL

To guarantee the correct procedure for cleaning and disinfection is followed, we recommend to correctly instruct the handler and qualified personnel. Thereby communicating that the following points need to be observed:

■ The clean bed is to be transported to the patient's home in such a way that it does not become polluted or contaminated.

■ When disassembling the bed we recommend cleaning and disinfecting it right away. The qualified personnel should be familiar with the steps necessary to thoroughly clean and disinfect (the operator will provide the individual steps necessary). It is necessary to use only the DGHM approved disinfectant in the approved concentration. The disinfectant must be appropriate for the surface being cleaned.

■ The qualified personnel must be equipped with water-tight one-time-use aprons and gloves.

Das Desinfektionsmittel muss für die entsprechende Oberfläche geeignet sein.

- Das Fachpersonal sollte für diese Tätigkeit mit flüssigkeitsundurchlässigen (Einweg-) Schürzen und Handschuhen ausgerüstet sein.

- Es sind nur frische, saubere Tücher zur Aufbereitung zu verwenden, die anschließend in die Wäsche gelangen.

- Im Anschluss an die Aufbereitung, vor Verlassen des Einsatzortes, muss das Fachpersonal eine Desinfektion ihrer Hände durchführen, bevor es zum nächsten Einsatzort fährt. Ein entsprechender Händedesinfektionsmittelspender (mit Hubspenderaufsatz) sollte zur Ausrüstung des Fachpersonals gehören.

Die unmittelbare Reinigung des Bettes vor Ort hat den Vorteil, dass keine "unsauberen" Betten bzw. Bettenteile mit sauberen Betten im gleichen Wagen transportiert werden. Ein Verschleppen von potentiell infektiösen Keimen, die eventuell am benutzten Bettgestell haften, wird auf diese Weise verhindert. Eine Übertragung von Keimen im Sinne einer nosokomialen Infektion wird bei konsequenter Beachtung dieser Empfehlungen sicher vermieden.

Wenn die Betten nicht gleich wieder zum Einsatz kommen, sollten diese vor Verstauben, vor versehentlicher Verschmutzung und vor Kontamination abgedeckt gelagert werden.

REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL

Beachten Sie die folgenden Empfehlungen, damit die Gebrauchsfähigkeit dieses Bettes möglichst lange erhalten bleibt:

- Die Oberflächen müssen unversehrt sein, jede Beschädigung muss unverzüglich ausgebessert werden.

- Only fresh and clean towels must be used to clean and disinfect, these must then be given to the laundry.

- After cleaning the bed, the qualified personnel must also disinfect their hands before going to the next patient. An appropriate disinfectant dispenser should be part of the qualified personnel's gear.

The immediate cleaning of the bed while disassembling has the benefit of not transporting "dirty" beds or bed parts along with clean ones in the same truck. A transfer of potentially infectious spores which may be clinging to the used bed may be avoided. A transfer of spores of a hospital-acquired infection will be avoided with strict adherence to these recommendations.

If the beds are to be stored for a while, they should be covered to keep them free of dust, accidental pollution and contamination.

CLEANING SUPPLIES AND DISINFECTANTS

Make use of these recommendations to keep the bed serviceable for a long time.

- The surfaces must be intact; any damage should be repaired immediately.

- We recommend a (damp) wash down. When choosing the cleaning solution make sure

■ Wir empfehlen eine (feuchte) Wischreinigung. Bei der Auswahl des Reinigungsmittels sollte darauf geachtet werden, dass es mild (haut- und oberflächenschonend) und umweltverträglich ist. Im Allgemeinen kann ein handelsübliches Reinigungsmittel verwendet werden.

■ Zur Reinigung und Pflege der lackierten Metallteile ist ein feuchtes Tuch unter Verwendung handelsüblicher, milder Haushaltsreiniger geeignet.

■ Zur Wischdesinfektion sollte das eingesetzte Desinfektionsmittel ein für den Bedarf zugelassenes, DGHM-gelistetes (in der dort empfohlenen Konzentration) Desinfektionsmittel sein. Mittel und Konzentrationen, wie sie in der Liste des Robert Koch-Institutes (bzw. des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes) angegeben sind, müssen nur im Seuchenfall gemäß des Infektionsschutzgesetzes nur auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes eingesetzt werden.

■ Trotz der sehr guten mechanischen Beständigkeit sollten Kratzer, Stöße, die durch die komplette Lackschicht hindurchgehen wieder mit geeigneten Reparaturmitteln gegen Eindringen von Feuchtigkeit verschlossen werden. Wenden Sie sich an BURMEIER oder an einen Fachbetrieb Ihrer Wahl.



■ Verwenden Sie keine Scheuermittel, Edelstahlpflegemittel und schleifmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Putzkissen. Hierdurch kann die Oberfläche beschädigt werden.



Hinweis:

Flächendesinfektionsmittel auf Aldehydbasis haben in aller Regel den Vorteil, dass sie ein breites Wirkspektrum aufweisen, einen relativ geringen Eiweißfehler haben und umweltverträglich sind. Ihr Hauptnachteil besteht in ihrem Allergisierungs- und Irritationspotential. Präpa-

reparation is mild (gentle to skin and surfaces) and environmentally friendly. In general a regular household cleaner can be used.

■ For cleaning the coated metal parts use a wet cloth with regular household cleaners

■ The disinfectant used for the wash down should be one approved for the purpose and listed by the DGHM (in the recommended dosage). Disinfectants and concentration listed by the Robert-Koch-Institute (the former Bundesgesundheitsamtes) should only be used in case of an epidemic according to the infection safety law and only on the orders of the appropriate health department.

■ Despite the excellent mechanical resistance of the bed, scratches, markings, etc. which penetrate the coating should be resealed using a suitable medium to prevent the penetration of moisture. Contact BURMEIER or your specialized dealer with any questions.

■ Do not use scouring agents, stainless steel cleaners, abrasive cleaning agents or scouring pads. These substances can damage the surface.

Notice:

Surface disinfectants based on aldehyde generally have the advantage of working on a large array of pathogens, have a relatively low protein error and are environmentally friendly. Its main disadvantage is the allergy-causing and irritative potential. Compounds on the basis of gluco-

rate auf Basis von Glucoprotamin haben diesen Nachteil nicht und sind ebenfalls sehr gut wirksam, meist aber etwas teurer. Desinfektionsmittel auf Basis von chlorabspaltenden Verbindungen können hingegen für Metalle, Kunststoffe, Gummi und andere Materialien bei längerem Kontakt oder zu hohen Konzentrationen korrosiv wirken. Darüber hinaus haben diese Mittel einen höheren so genannten Eiweißfehler, sind schleimhautreizend und weisen eine schlechte Umweltverträglichkeit auf.

UMGANG MIT DESINFEKTIONSMITTEL

- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen für die jeweiligen Produkte und deren Hersteller. Beachten Sie die exakte Dosierung! Wir empfehlen automatische Dosiergeräte.
- Setzen Sie die Lösung stets mit kaltem Wasser an, um schleimhautreizende Dämpfe zu vermeiden.
- Tragen Sie Handschuhe, um direkten Hautkontakt zu vermeiden.
- Bewahren Sie angesetzte Flächendesinfektionsmittellösungen nicht in offenen Gefäßen mit schwimmenden Reinigungslappen auf. Verschießen Sie die Gefäße!
- Benutzen Sie verschließbare Flaschen mit Pumpdosierspender für die Benetzung der Reinigungslappen.
- Lüften Sie den Raum nach durchgeführter Flächendesinfektion.
- Führen Sie eine Wischdesinfektion durch, keine Sprühdesinfektion! Bei einer Sprühdesinfektion wird ein großer Teil des Desinfektionsmittels als Sprühnebel freigesetzt und somit inhaliert.
- Darüber hinaus kommt dem Wischeffekt eine bedeutende Rolle zu.
- Verwenden Sie keinen Alkohol für größere Flächen.

protamine do not have this disadvantage and are very effective, though mostly more expensive. Disinfectants on the basis of chlorine splitting combinations, with prolonged contact or in too high doses, can be corrosive to metals, plastics, rubber and other materials. In addition to this, the compounds have a high protein error, are irritants to the mucous membranes and are not environmentally friendly.

CONTACT WITH DISINFECTANTS

- Follow the guidelines for each product and manufacturer. Observe the exact dosage! We recommend automatic dosage apparatus.
- Always mix the solution with cold water, to avoid vapors that aggravate the mucous membranes.
- Wear gloves to avoid direct skin contact.
- Do not store the mixed disinfectant in open containers with the cleaning rag inside. Close the container!
- Use closeable bottles with dosage pumps for wetting the cleaning rag.
- After finishing the surface disinfection ventilate the room.
- Use a wipe down disinfecting method, do not use a spray. Using the disinfectant as a spray causes the disinfectant to turn into a mist which could be inhaled.
- The wipe-down disinfection plays a major part.
- Do not use alcohol for larger areas.

INSTANDHALTUNG

Gesetzliche Grundlagen

Betreiber von Pflegebetten sind gemäß der

- ♦ Medizinprodukte-Betreiberverordnung § 4 (Instandhaltung)
- ♦ Berufsgenossenschafts-Vorschrift BGV A3 (Prüfung ortveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in gewerblichem Einsatz)

dazu verpflichtet, den sicheren Zustand von Medizinprodukten über die gesamte Einsatzdauer zu bewahren. Hierzu gehören auch eine regelmäßig durchgeführte fachgerechte Wartung sowie regelmäßige Sicherheitsprüfungen.

Hinweise für Betreiber

Dieses Bett ist so konstruiert und gebaut, dass es über einen langen Zeitraum sicher funktionieren kann. Bei sachgemäßer Bedienung und Anwendung hat dieses Bett, eine zu erwartende Lebensdauer von 2 bis 8 Jahren. Die Lebensdauer richtet sich nach Einsatzbedingungen und -häufigkeit.



Wichtig!
Important!



Warning!
Warning!

Durch wiederholten Transport, Auf- und Abbau, unsachgemäßen Betrieb sowie Langzeiteinsatz ist es nicht auszuschließen, dass Beschädigungen, Defekte und Verschleißerscheinungen eintreten können. Diese Mängel können zu Gefährdungen führen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behoben werden.

Daher existieren gesetzliche Grundlagen zur Durchführung regelmäßiger Prüfungen, um den sicheren Zustand dieses Medizinproduktes dauerhaft zu gewährleisten.

Gemäß § 4 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung obliegt dem Betreiber die Instandhaltung. Aus diesem Grunde sind nachfolgend

MAINTENANCE

Legal Principles

In accordance with:

- ♦ Medizinprodukte-Betreiberverordnung § 4 (Maintenance)
- ♦ Berufsgenossenschafts-Vorschrift BGV A3 (Testing of mobile electrical equipment in industrial use)

operators of nursing beds are obligated to keep medical products in a safe state throughout their entire service life. This also includes regularly carrying out expert maintenance as well as safety checks.

Notice for Operators

This bed has been constructed and built to last safely for a long time. With appropriate operation and use, this bed has a life expectancy of 2 to 8 years. The life expectancy is based on the conditions and frequency of use.

Through repeated transport, assembly and disassembly, improper operation as well as long time use, it is possible that damage, defects and deterioration can occur. These deficiencies can lead to danger if they are not recognized and quickly fixed.

Because of this there are legal bases for the regular enforcement of tests to ensure the safe condition of this medical product.

According to § 4 of the Medizinprodukte-Betreiberverordnung operators are obliged to maintain the product. Because of this the following regular inspection and function controls are to be

beschriebene regelmäßige Inspektionen und Funktionskontrollen sowohl vom Betreiber als auch von den Anwendern vorzunehmen.

Weisen Sie die Anwender auf nachfolgende durchzuführende Prüfung hin.

DURCH DEN ANWENDER

Neben den regelmäßigen umfangreichen Prüfungen durch technisches Fachpersonal muss auch der normale Anwender (Pflegekraft, betreuende Angehörige usw.) in kürzeren, regelmäßigen Abständen, sowie vor jeder Neubelegung eine minimale Sicht- und Funktionsprüfung vornehmen.



- Besteht der Verdacht, dass eine Beschädigung oder Funktionsstörung vorliegt, ist das Bett sofort außer Betrieb zu nehmen und vom Stromnetz zu trennen, bis ein Austausch oder eine Reparatur der schadhaften Teile erfolgt ist!

- Wenden Sie sich für den Austausch oder eine Reparatur der schadhaften Teile an Ihren zuständigen Betreiber.

Empfehlung:

Alle elektrischen und mechanischen Komponenten einmal monatlich überprüfen. Zusätzlich das Netzkabel und das Handschalterkabel nach jeder aufgetretenen mechanischen Belastung und nach jedem Standortwechsel überprüfen.

Hierzu dient die Checkliste auf der folgenden **Seite 47**.

performed by the operator as well as the user.
Point out these necessary tests to the user.

BY THE USER

Along with the regular substantial tests by technically qualified personnel, the normal user (nurses, supporting relatives, etc.) must also perform a sight and function check at shorter, regular intervals, as well as before a new patient.

- If damage or a malfunction is suspected, take the bed out of service immediately and disconnect it from the power until an exchange or repair can be made!

- Contact your operator regarding exchange or repair of faulty parts.

Recommendation:

All electrical and mechanical components should be tested monthly. The main power cable as well as the hand switch cable should be checked after every mechanical load and after every relocation.

For this purpose use the checklist on the following **page 48**.

Checkliste : Prüfprotokoll durch den Anwender

Prüfung		OK	Nicht OK	Fehlerbeschreibung
Sichtprüfung der elektrischen Komponenten				
Handschalter, -kabel	Beschädigung, Kabelverlegung			
Netzkabel	Beschädigung, Kabelverlegung			
Handschalter	Beschädigung, Folie			
Sichtprüfung der mechanischen Komponenten				
Aufrichter, -aufnahmen	Beschädigung, Verformungen			
Bettgestell	Beschädigung, Verformungen			
Federholzplatten	Beschädigung, Splitterbildung			
Holzumbau	Beschädigung, Splitterbildung			
Liegeflächenrahmen	Beschädigung, Verformungen			
Seitengitterholme	Beschädigung, Splitterbildung			
Funktionsprüfung der elektrischen Komponenten				
Handschalter	Funktionstest, Sperrfunktion			
Zugentlastung, Verbindungskabel	Fester Sitz			
Funktionsprüfung der mechanischen Komponenten				
Notabsenkung der Rückenlehne	Test laut Gebrauchsanweisung			
Laufrollen	Fahren und Bremsen			
Rändelschrauben	Fester Sitz			
Seitengitter	Sicheres Einrasten, Entriegeln			
Unterschenkellehne	Einrasten			
Zubehör (z.B. Aufrichter, Triangelgriff)	Befestigung, Beschädigung			
Unterschrift des Prüfers:	Ergebnis der Prüfung:			Datum:

Checklist: Test protocol by the user

Test	OK	Not OK	Defect description
Visual check of electrical components			
Hand switch and cable	Damage, Cable Routing		
Power cord	Damage, Cable Routing		
Hand switch	Damage, Foil		
Visual check of mechanical components			
Trapeze pole/Socket	Damage, Deformation		
Bed frame	Damage, Deformation		
Spring wood slates	Damage, Splinters		
Bed box	Damage, Splinters		
Reclining surface frame	Damage, Deformation		
Side rail	Damage, Splinters		
Function test of electrical components			
Hand switch	Functiontest, Blocking function		
Strain relief, Connection cables	Tight fit		
Function test of mechanical components			
Emergency lowering of backrest	Test according to instruction manual		
Castors	Locking and unlocking		
Knurled screws	Tight fit		
Side rail	Safe locking/unlocking		
Lower leg rest	Latching		
Accessories (e.g. trapeze pole, trapeze)	Secure, Damage		
Signature of the tester:	Result of the test:		Date :

DURCH DEN BETREIBER

Der Betreiber dieses Pflegebettes ist nach MPBetreibV § 4 verpflichtet, bei jedem Neuaufbau, jeder Instandhaltung und im laufenden Betrieb regelmäßige Prüfungen durchzuführen, um den sicheren Zustand dieses Pflegebettes zu gewährleisten.

Diese Prüfungen sind im Rahmen der regelmäßigen Wartungsarbeiten je nach Einsatzbedingungen gemäß der MPBetreibV § 4 und von den Berufsgenossenschaften für ortveränderliche elektrische Betriebsmittel in gewerblichem Einsatz vorgeschriebenen Prüfungen nach BGV A3 (bisher VBG4) zu wiederholen.

- ◆ Die Durchführung der Funktionsprüfung, und die Bewertung und Dokumentation der Prüfergebnisse darf gemäß MPBetreibV § 4 nur durch sachkundige Personen erfolgen, die die notwendigen Voraussetzungen und erforderlichen Mittel zur ordnungsgemäßen Ausführung besitzen.
- ◆ Die Durchführung der elektrischen Messung nach VDE 0751 darf bei Vorhandensein geeigneter Messmittel auch von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person (im Sinne der BGV A3 (bisher VBG 4)) mit medizinischen und gerätespezifischen Zusatzkenntnissen erfolgen. Die Bewertung und Dokumentation der Prüfergebnisse darf nur durch eine Elektrofachkraft mit medizinischen und gerätespezifischen Zusatzkenntnissen erfolgen.
- ◆ Halten Sie die Reihenfolge bei der Prüfung nach VDE 0751 ein:
 - I. Sichtprüfung
 - II. Elektrische Messung
 - III. Funktionsprüfung

BY THE OWNER

The owner of the nursing bed according to MPBetreibV § 4 is obligated with every new assembly, every maintenance and throughout the operation, to perform regular inspections, to ensure the safe condition of the nursing bed.

These tests are to be repeated during regular maintenance and depending on the use according to MPBetreibV § 4 and from the Directive of the German Employers Liability Insurance Association according to BGV A3 (former VBG4).

- ◆ The performance of the function test as well as the rating and documentation of the test results can, according to MPBetreibV § 4 only be performed by experts with the appropriate knowledge, training and experience as well as the tools necessary to perform it according to the rules.
- ◆ The performance of electrical measurements according to VDE 0751 can, with availability of proper measuring equipment, also be performed by an electro-technically trained person (according to BGV A3 (formerly VBG 4)) with medical and appliance specific training. The assessment and documentation of the test results can only be performed by an expert with the corresponding knowledge, training and experience.
- ◆ Observe this sequence for the inspection according to VDE 0751:
 - I. Visual test
 - II. Electric Measurements
 - III. Function Test

Prüfzyklus:

Wir empfehlen als Richtwert eine jährliche Prüfung, die je nach Einsatzbedingungen in eigener Verantwortung unter nachweislicher Einhaltung der 2 % Fehlerquote (siehe auch BGV A3: § 5, Tabelle 1B) auf maximal zwei Jahre verlängert werden kann.



- Besteht der Verdacht, dass eine Beschädigung oder Funktionsstörung vorliegt, ist das Bett sofort außer Betrieb zu nehmen und vom Stromnetz zu trennen, bis ein Austausch oder eine Reparatur der schadhaften Teile erfolgt ist!
- Wenden Sie sich für den Austausch oder eine Reparatur der schadhaften Teile an Ihren zuständigen Betreiber.

Die Prüfprotokoll-Vorlagen auf den **Seiten 51 und 52** sollten verwendet werden.

Test cycle:

We recommend that the yearly inspection, which depending on usage with accountability according to demonstrably observing the 2% error quota (see BGV A3: § 5, table 1 B) can maximally be extended to a total of two years.

- If damage or a malfunction is suspected, take the bed out of service immediately and disconnect it from the power until an exchange or repair can be made!
- Contact your operator regarding exchange or repair of faulty parts.

The test protocol draft on **pages 53 and 54** can be used.



Modell	Bettenmodell
Type	Artikelnummer
Serie	Seriennummer

Model	Bed model
Type	Item Number
Serial	Serial Number

ERSATZTEILE

Die entsprechenden Ersatzteile sind unter Angabe der Artikel-, Auftrags- und Seriennummer bei BURMEIER erhältlich. Die notwendigen Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild, das sich kopfseitig am Liegeflächenrahmen befindet.

SPARE PARTS

The corresponding replacement parts can be obtained from BURMEIER by specifying the item number, the order number and the serial number. The necessary details are found on the type plate under the cross tubing of the reclining surface frame.

Auftraggeber / med. Einrichtung / Praxis :						
Anschrift:						
Es wurde durchgeführt: <input type="checkbox"/> Wiederholungsprüfung		<input type="checkbox"/> Prüfung vor der Erst-Inbetriebnahme				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Prüfung nach Reparatur / Instandsetzung				
Gerätetyp: <input type="checkbox"/> Krankenhausbett <input checked="" type="checkbox"/> Pflegebett		Schutzklasse: <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II				
Bettentyp: <input type="checkbox"/> WESTFALIA III <input type="checkbox"/> WESTFALIA REHA		Inventarnummer:				
Standort:		Seriennummer:				
Hersteller: <i>Burmeier GmbH & Co. KG</i>		Anwendungsteile: <i>keine</i>				
Verwendete Prüfgeräte (Typ / Inventarnummer):		1.				
Klassifizierung nach MPG: Klasse I		2.				
I. Sichtprüfung				OK	nicht OK	Mangelbeschreibung
Sichtprüfung der elektrischen Komponenten :						
Aufkleber und Typenschilder	Vorhanden, lesbar					
Gehäuse des Steuergerätes	Beschädigung					
Handschalter	Beschädigung, Folie					
Motoren-, Handschalter- und Netzkabel	Beschädigung, Kabelverlegung					
Gehäuse und Hubrohre der Antriebsmotoren	Beschädigung, korrekter Sitz					
Stecker/Steckerabdeckleiste des Steuergerätes	Vorhanden, korrekter Sitz					
Sichtprüfung der mechanischen Komponenten :						
Aufkleber und Typenschilder	Vorhanden, lesbar					
Aufrichter und -sockel; Haltegriff mit Gurtband	Beschädigung, Verformungen					
Bettgestell	Beschädigung, Verformungen					
Federholzplatten	Beschädigung, Splitterbildung					
Laufrollen	Beschädigung					
Liegefläche	Beschädigung, Verformungen					
Seitengitterholme	Beschädigung, Splitterbildung					
Schweißnähte	Gerissene Schweißnähte					
Verbindungselemente, Schrauben	Fester Sitz, Vollständigkeit					
Verschleißteile, wie Gelenkpunkte	Beschädigung, Verformungen					
II. Elektrische Messung nach VDE 0751-1:2001-10 (Geräteableitstrom, direkt)						
Hierbei wie folgt vorgehen :				OK	nicht OK	Mangelbeschreibung
1. Netzkabel des Bettes in die Prüfsteckdose des Messgerätes stecken.						
2. Sonde des Messgerätes an einen blanken, leitfähigen Teil des Untergestells (Schraube o. ä.) anschließen.						
3. Für die Dauer der Messungen Motoren durch Handschalter aktivieren.						
4. Messvorgang am Messgerät starten.						
	Grenzwert	Wert der Erstmessung	Aktueller Ist-Wert			
Ergebnis: Bett SK II (Typ B)	0,1 mA	mA	mA			

III. Funktionsprüfung		OK	nicht OK	Mangelbeschreibung
Funktionsprüfung der elektrischen Komponenten :				
Handschalter, Sperrfunktion	Test lt. Gebrauchsanweisung			
Endlagenabschaltung der Antriebsmotoren	Automatisches Abschalten			
Steuergerät und Motoren	Test lt. Gebrauchsanweisung			
Steuergerät und Motoren	Unnormale Geräusentwicklung			
Zugentlastung des Netzkabels	Netzkabel fest verschraubt			
Funktionsprüfung der mechanischen Komponenten :				
Gelenke und Drehpunkte	Leichtgängig			
Haltegriff mit Gurtband	Sicherer Halt			
Laufrollen	Bremsen und Fahren			
Notabsenkung der Rückenlehne	Test lt. Gebrauchsanweisung			
Seitengitter	Einrasten, sicherer Halt			
Unterschenkellehne	Einrasten			
Zubehör (z.B. Aufrichter, Haltegriff)	Befestigung, Beschädigung, Eignung			
Ergebnis der Prüfung				
Alle Werte im zulässigen Bereich:	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	Nächster Prüftermin:	
Die Prüfung wurde bestanden:	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN		
Falls Prüfung nicht bestanden:	<input type="checkbox"/> Defekt, Bett nicht verwenden! => Instandsetzung <input type="checkbox"/> Defekt, Bett nicht verwenden! => Aussonderung <input type="checkbox"/> Bett entspricht nicht den Sicherheitsvorgaben			
Prüfmarke wurde angebracht:	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN		
Zu diesem Prüfprotokoll gehören:				
Bemerkungen:				
Geprüft am:	Prüfer:	Unterschrift:		
Bewertet am:	Betreiber/Fachkraft:	Unterschrift:		

Prüfprotokoll
über eine
Prüfung
elektromedizi-
nischer Geräte
nach
DIN VDE 0751-1:
2001-10
Blatt 2 von 2

Customer / med. Facility / Practice:			
Adress:			
Carried out: <input type="checkbox"/> Repeat inspection		<input type="checkbox"/> Inspection prior to initial operation	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Inspection following repairs / servicing	
Equipment type: <input type="checkbox"/> Hospital bed <input checked="" type="checkbox"/> Nursing bed		Protection class: <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II	
Bed type: <input type="checkbox"/> WESTFALIA III <input type="checkbox"/> WESTFALIA REHA		Inventory number:	
Location:		Serial number:	
Manufacturer: <i>Burmeier GmbH & Co. KG</i>		User-specific parts: <i>none</i>	
Testing equipment used (Type / Inventory number):		1.	
MPG Classification: <i>Class I</i>		2.	
I. Visual Inspection		OK	Not OK
Defect Description			
Visual Inspection of electrical componenets :			
Stickers and Type plates	Presence, Legible		
Housing of transformer unit / Power adapter	Damage		
Hand switch	Damage, Foil intact		
Motor-, Hand switch- and Power cables	Damage, Routing		
Housing and lift rods of motor drives	Damage, Correct position		
Plug and plug covering strip of control unit	Available, Correct position		
Visual inspection of mechanical componenets :			
Stickers and Type plates	Presence, Legible		
Trapeze pole / socket; Trapeze with belt strap	Damage, Deformation		
Bed frame	Damage, Deformation		
Spring wood slates	Damage, Splinters		
Castors	Damage		
Reclining surface	Damage, Deformation		
Side rail beams	Damage, Splinters		
Welded seams	Split welded seams		
Connecting parts, Screws	Tight fit, Complete		
Wearing parts such as joints	Damage, Deformation		
II. Electric measurments according to VDE 0751-1:2001-10 (leakage current, direct)			
Proceed as follow:		OK	Not OK
Defect Description			
1. Plug the power cable into the test socket on the measuring instrument.			
2. Connect the measuring instrument probe with an exposed conductive part of the bed frame (screws, etc.)			
3. Activate the drive motors by using the hand switch for the duration of the measurement.			
4. Start measuring procedures on the measuring instrument.			
	Limit value	Value of first measurement	Current actual value
Result: Bed SK II (Type B)	0,1 mA	mA	mA

III. Performance check		OK	Not OK	Defect description
Performance check of the electrical components :				
Hand switch, Locking function	Test according to instruction manual			
Motion limit switching of the motors	Automatic cut-off			
Control unit and drive motors	Test according to instruction manual			
Control unit and drive motors	Abnormal Noise Development			
Strain relief for power cable	Power cable firmly fastened			
Funktionsprüfung der mechanischen Komponenten :				
Joints and pivots	Smooth operation			
Trapeze with belt strap	Secure hold			
Castors	Locking and Unlocking			
Emergency lowering of the back rest	Test according to instruction manual			
Side rails	Safe locking, Secure hold			
Lower leg rest	Locking			
Accessories (e.g. trapeze pole, trapeze	Fastening, Damage, Suitability			
Results of the inspection				
All values within permissible range :		<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	Next inspection date:
Inspection passed :		<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
If inspection was not passed :		<input type="checkbox"/> Defective, do not use the bed ! => Repair <input type="checkbox"/> Defective, do not use the bed ! => Take out of service <input type="checkbox"/> Bed does not meet the safety standards		
Test approval sticker applied :		<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	
Part of this inspection report:				
Comments:				
Inspected on:		Inspector :		Signature :
Evaluated on:		Operator/Expert :		Signature :

Test protocol of
an inspection of
electro-medical
equipment
according to
DIN VDE 0751-1:
2001-10
Page 2 of 2

HERSTELLERANSCHRIFT

Um Funktionssicherheit und Garantieansprüche zu erhalten, dürfen nur BURMEIER Original-Ersatzteile verwendet werden!

Für Ersatzteilbestellungen, Kundendienstanforderungen und bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Burmeier GmbH & Co. KG
(Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe)

Pivitsheider Straße 270

32791 Lage/Lippe

Tel.: 0 52 32 / 98 41- 0

Fax: 0 52 32 / 98 41- 41

Email: auftrags-zentrum@burmeier.de

MANUFACTURER'S ADDRESS

In order to maintain operational safety and the right to claim under warranty, only original BURMEIER replacement parts may be used!

For ordering replacement parts, customer service requests and other questions, please contact:

Burmeier GmbH & Co. KG
(A subsidiary of the Stieglmeyer Group)

Pivitsheider Strasse 270

32791 Lage/Lippe, Germany

Phone: ++49 52 32 / 98 41-0

Telefax: ++49 52 32 / 98 41-41

Email: auftrags-zentrum@burmeier.de

AUSTAUSCH ELEKTRISCHER KOMPONENTEN



Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

- Ziehen Sie vor Beginn der Arbeiten den Netzstecker aus der Steckdose!
- Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur vom Kundendienst, vom Antriebshersteller oder von qualifiziertem und befugtem Elektrofachpersonal unter Berücksichtigung aller maßgeblichen VDE-Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden!



- Führen Sie den Ausbau der Antriebsmotoren nur in der Grundstellung (waagerechte Liegeposition) durch, anderenfalls besteht Quetschgefahr durch abstürzende Liegeflächenteile.
- Alle Antriebskomponenten sind wartungsfrei und dürfen nicht geöffnet werden. Im Falle einer Funktionsstörung ist immer die entsprechende Komponente komplett auszutauschen!

REPLACEMENT OF ELECTRICAL COMPONENTS

Dangerous voltage, electric shock possible

- Before doing any work unplug the main power cable from the wall socket!
- Any work on the electrical equipment may only be performed by customer service, the motor manufacturer or qualified and authorized electricians under consideration of the applicable VDE rules and safety guidelines!

- Only dismantle the drive motors when the reclining surface is in the horizontal position, otherwise there is the risk of being injured by falling parts of the mattress base.
- All the drive components are maintenance-free and must not be opened. In the event of a malfunction, the corresponding components should always be replaced in full!

Austausch des Handschalters

- ☞ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ☞ Ziehen Sie den Stecker am Ende des Spiralkabels des Handschalters aus der Buchse unter der Liegefläche.
- ☞ Verlegen Sie das Kabel des neuen Handschalters so, dass das Kabel nicht durch bewegliche Teile des Bettes beschädigt werden kann.
- ☞ Stecken Sie den Stecker am Ende des Spiralkabels des neuen Handschalters in die Buchse des Handschalters.
Achten Sie darauf, dass der O-Dichtring am Stecker nicht beschädigt ist; anderenfalls ist diese Steckverbindung nicht gegen Feuchtigkeit geschützt.
- ☞ Führen Sie nach dem Austausch einen Funktionstest der elektrischen Verstellungen durch!

Exchange of the Hand switch

- ☞ Unplug the power plug from the wall socket.
- ☞ Unplug the plug at the end of the spiral cable of the hand switch from the connector underneath the reclining surface.
- ☞ Lay the cable of the new hand switch so that it cannot be damaged by moving parts of the bed.
- ☞ Insert the plug at the end of the spiral cable of the new hand switch into the connector of the hand switch.
Take care that the O-ring on the plug is not damaged, otherwise the connection may not be moisture-proof.
- ☞ Carry out a function test of the electrical adjustments after the exchange.

FEHLERBEHEBUNG

Die folgende Tabelle auf Seite 58 bietet Hilfen bei der Behebung von Funktionsstörungen:

Treten Funktionsstörungen während des Betriebs auf, die der Anwender nicht mit Hilfe der Störungsabhilfetabelle lösen kann, so ist das Fachpersonal für Instandhaltung und Reparatur des zuständigen Betreibers zu informieren.



Warnung!
Warning!

Der Anwender darf auf **gar keinen Fall** versuchen, Defekte an den elektrischen Komponenten selber zu beheben!



Gefahr!
Danger!

Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

Arbeiten an dem elektrischen Antriebssystem dürfen nur vom Kundendienst, vom Antriebshersteller oder von qualifiziertem und befugtem Elektrofachpersonal unter Berücksichtigung aller maßgeblichen VDE-Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden!

TROUBLESHOOTING

The following table on page 59 is a guide to rectifying common malfunctions:

If a function fault is detected during operation, which the user cannot rectify with the use of the trouble-shooting table aid, the specialized staff for maintenance and repair of the appropriate owner should be informed.

The user may **under no circumstances** try to eliminate defects at the electrical equipment!

Dangerous voltage, electric shock possible!

Any work on the electrical equipment may only be performed by service personnel, the motor manufacturer or qualified and authorized electricians as required by the applicable VDE rules and safety guidelines!

Störungsabhilfetabelle

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Handscharter/ Antriebssystem ohne Funktion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Netzkabel nicht eingesteckt ■ Stecker hat keine Spannung ■ Stecker vom Handscharter nicht richtig eingesteckt ■ Handscharter oder Antriebssystem defekt ■ Funktionen auf Handscharter gesperrt 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Netzkabel einstecken ☞ Steckdose/Sicherung prüfen ☞ Steckverbindung prüfen ☞ Informieren Sie Ihren Betreiber zwecks Reparatur ☞ Funktionen freigeben (siehe Seite 30)
Antriebe laufen bei Tastendruck nur kurz an	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zuviel Gewicht auf dem Bett ■ Bett stößt auf ein Hindernis 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Belastung reduzieren ☞ Hindernis beseitigen
Einzelne Antriebe laufen nur in einer Richtung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Handscharter, Antrieb oder Steuergereät defekt 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Informieren Sie Ihren Betreiber zwecks Reparatur
Funktionen entgegen dem Handscharteraufdruck	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interne Motorstecker vertauscht 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Informieren Sie Ihren Betreiber zwecks Reparatur
Antriebe stoppen nach längerer Verstellzeit plötzlich	<ul style="list-style-type: none"> ■ Thermoscharter im Trafo des Steuergeräts wurde ausgelöst 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Mindestpause beachten (siehe Seite 28)

Trouble-shooting table aid

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Hand switch/drive unit system not functioning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Main power cable is not plugged in ■ No power supply to socket ■ Hand switch plug is incorrectly inserted ■ Hand switch or drive unit system is defective ■ Functions are blocked on Handswitch 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Insert main power cable ☞ Check socket/fuse box ☞ Check connector plugs ☞ Inform your operator about necessary repairs ☞ Unblock functions (see page 30)
Drives only operates for a short time when buttons are pressed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Too much weight on the bed ■ Bed is blocked by an obstacle 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Reduce load ☞ Remove obstacle
Individual drives operate in one direction only	<ul style="list-style-type: none"> ■ Defective hand switch, motor drives or control unit 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Inform your operator about necessary repairs
The wrong function is active when hand switch buttons are pressed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Internal motor plugs incorrectly connected (mixed up) 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Inform your operator about necessary repairs
Motor drives stopped suddenly after a long time of adjustments	<ul style="list-style-type: none"> ■ Thermo switch in transformer (drive unit) is triggered on 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Leave the drive unit system in neutral position for 20 or 30 minutes to cool off (see page 28)

ZUBEHÖR

An dem Bett darf ausschließlich nachfolgend aufgeführtes Original BURMEIER Zubehör verwendet werden. Bei Verwendung anderer Zubehöerteile übernehmen wir für daraus resultierende Unfälle, Defekte und Gefährdungen keinerlei Haftung.

Artikelnummer / Item number	Benennung
146602	Aufrichter mit Triangelgriff
167625	Seitengitterholm, aufsteckbar
156788	Schaumlederbezug für 2er Seitengitter
174296	Serviertablett zum Auflegen auf die Seitengitterholme
(1x) 143279	Bettverlängerung um ca. 20 cm,
(1x) 156410	inklusive 4 längere Seitengitterholme
144842	Polsterteil für Bettverlängerung 90 x 21 x 12 cm
175591/174231	Leselampe mit Klammer zur Befestigung am Aufrichter
175593/114352	Leselampe mit Adapter zur Befestigung an Aufrichterhülse
116354	Infusionshalter (5200-28-50)



Bei Einsatz von Seitengittern, Infusionsständern usw. an elektrisch verstellbaren Betten unbedingt beachten :

Durch Anordnung dieser Zubehöerteile dürfen beim Verstellen von Rücken- und Beinlehne keine Quetsch- oder Scherstellen für den Patienten entstehen. Falls dieses nicht gewährleistet werden kann, muss der Anwender die Verstellung der Rücken- und Beinlehne durch den Patienten sicher unterbinden.

- ▶ Bringen Sie hierzu den Handschalter außerhalb seiner Reichweite an (z. B. am Fußende), oder sperren Sie die Verstellmöglichkeiten am Handschalter.

ACCESSORIES

Only the Original BURMEIER accessories listed below may be used. If other accessories are used, we can not be liable for any resulting injuries, defects and dangers.

Description
Trapeze pole with trapeze
Side rail mounting
Foam covers for 2 nd side rails
Attachable serving tablet mounted on the side rail beams
20 cm bed extension with 4 extended side rail beams
Filler pad for bed extension 90 x 21 x 12 cm
Reading light with clamp for the trapeze pole
Reading light with adapter for mounting the trapeze pole socket
Drip/I.V. holder (5200-28-50)

When using side rail, drip/I.V., etc. with electrically adjustable beds, please note :

Make sure that the arrangement of accessories does not produce any crush or shearing zones for the patient when the back- or leg rests are adjusted. If this cannot be ensured, the user must safely prevent the patient from adjusting the back- and leg rest.

- ▶ To do so, attach the hand switch out of reach (e.g. at the foot end of the bed), or lock hand switch adjustments.

ANFORDERUNGEN AN DIE MATRATZE

	Grundlegende Abmessungen:
200 x 90 cm	Länge x Breite
10 - 14 cm	Dicke/Höhe
min. 35 kg/m ³	Raumgewicht des Schaumstoffs
min. 4,2kPa	Stauchhärte
	Zu beachtende Normen:
	DIN 13014
	DIN 597 Teil 1 und 2

REQUIREMENTS OF THE MATTRESS

	Basic dimensions:
	Length x Width
	Thickness/Height
	Volume density of foamed material
	Compression load deflection
	Norms to be observed:
	DIN 13014
	DIN 597 Section 1 and 2

Kapitel 9

Chapter 9

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

MEASUREMENTS AND DIMENSIONS

	Montiertes Bett mit Seitengittern:
200 x 80-100 cm	Liegefläche
211 x 92-112 cm	Außenmaße
ca. 110 kg	Gesamtgewicht, je nach Ausführung
175 kg	Sichere Arbeitslast
135 kg	Patientengewicht, max.
	Zerlegtes Bett:
21 kg	Bethäupter
33 kg	Untergestell mit Motor
40 kg	Liegeflächenrahmen mit Motoren
12 kg	4 Seitengitterholme aus Holz
5 kg	Aufrichter

	Assembled bed with side rails:
	Reclining surface
	External dimensions
	Total weight, depending on model
	Safe load
	Patient weight, max.
	Disassembled bed:
	End boards
	Base frame
	Reclining surface frame with motors
	4 side rail beams, wooden
	Trapeze pole

ELEKTRISCHE DATEN

Linak CB 06	Steuergerät (angeflanscht an Höhenmotor):
AC 230 V, ± 10 %, 50 Hz	Type
AC 1,0 A	Eingangsspannung
Glasrohr-Feinsicherung	max. Stromaufnahme
5x20 mm; T1 A/AC 250 V	Interne Gerätesicherung
DC 24 V	Ausgangsspannung
max. DC 5,5 A	Ausgangsstrom
Aussetzbetrieb (AB) 2 min EIN /18 min AUS	Einschaltdauer
IP 54, spritzwassergeschützt	Schutzart
Schutzklasse II, Typ B, MPG Eingruppierung	Klassifikation
Klasse I, nicht für Anwendung in explosionsfähigen Atmosphären	

H05 BQ-F 2 x 0,75 mm² (EPR-Qualität)

Netzkabel

Type

Handschalter mit Sperrfunktion

Linak LA 73

Type

IP 64

Schutzart

Motoren Liegefläche-Höhe

Linak LA 27

Type

3500 N / 470 mm / 250 mm

Kraft / Einbaumaß / Hub

DC 24 V

Eingangsspannung

AB: 2 Min EIN / 18 Min AUS

Einschaltdauer

IP 54

Schutzart

Motor Rückenlehne

Linak LA 27

Type

3000 N / 320 mm / 110 mm

Kraft / Einbaumaß / Hub

DC 24 V

Eingangsspannung

AB: 2 Min EIN / 18 Min

Einschaltdauer

IP 54

Schutzart

Motor Oberschenkellehne

Linak LA 27

Type

2500 N / 270 mm / 60 mm

Kraft / Einbaumaß / Hub

ELECTRICAL DATA

Control unit

(flange mounted to the height motor):

Type

Input Voltage

Max Amps

internal fuse; glass tube fuse

Output Volts

Output Amps

Operating time

Protection, splash proof

Classification, Protection class II, Type B, MPG classification Class I, not for use in explosive atmospheres.

Power Cable

Type

Hand switch with locking function

Type

Protection

Motors for reclining surface height adjustment

Type

Power / Size / Lift

Input Voltage

Operating Time

Protection

Motor for backrest

Type

Power / Size / Lift

Input Voltage

Operating Time

Protection

Motor for thigh rest

Type

Power / Size / Lift

DC 24 V	Eingangsspannung	Input Voltage
AB: 2 Min EIN / 18 Min AUS	Einschaltdauer	Operating Time
IP 54	Schutzart	Protection

Erklärung verwendeter Bildzeichen:



♦ Gerät mit Anwendungsteil vom Typ B gemäß IEC 601-1
(Besonderer Schutz gegen elektrischen Schlag)



♦ Gerät der Schutzklasse II, schutzisoliert



♦ Transformator mit thermischen Sicherungselement



♦ Sicherheitstransformator nach VDE 0551



♦ Achtung! Gebrauchsanweisung beachten
♦ Schutz der elektrischen Ausstattung vor Staubablagerung im Inneren und vor Spritzwasser von allen Seiten

IP 54

♦ Staubdichter Schutz der elektrischen Ausstattung im Inneren und Schutz vor Spritzwasser von allen Seiten

IP 64



♦ Konformitätskennzeichen nach der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42 EWG

Explanation of Icons:

♦ Unit with Type B application according to IEC 601-1
(Special protection against electric shock)

♦ Protection Class II device, double insulation

♦ Transformer with thermal fuse block

♦ Safety transformer in accordance with VDE 05510

♦ Caution! Consult instruction manual

♦ The electrical equipment offers protection from internal dust deposits and is splash-proof from all sides

♦ The electrical equipment is dust-proof and is splash-proof from all sides

♦ Conformity mark in accordance with Medical Products directive 93/42 EWG

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

max. 48 dB (A)

Geräuschentwicklung bei Verstellung

Nachfolgend genannte Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden:

Bei Lagerung:

min. + 5° C max.+ 50° C
min. 50 % max. 70 %

Lagertemperatur
Relative Luftfeuchte

Bei Betrieb:

min. + 10° C max. + 40° C
min. 20 % max. 90 % nicht kondensierend
min. 700 hPa max. 1060 hPa

Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchte
Luftdruck

AMBIENT CONDITIONS

Noise level during motor adjustments

The ambient conditions stated below must be observed:

In storage

Storage temperature
Relative humidity

In operation

Ambient temperature
Relative humidity
Air pressure

ANGEWENDETE NORMEN / RICHTLINIEN

EG-Richtlinie 93/42/EWG	Medizinprodukte-Richtlinie
VDE 0751-1:2001-10	Wiederholungsprüfungen ... von medizinischen elektrischen Geräten
EN 12182:1999-11	Technische Hilfen für behinderte Menschen
DIN 32977-1:1992-07	Behindertengerechtes Gestalten
EN 14971: 2001	Risikomanagement für Medizinprodukte
DIN EN 1970 : 2005-10	Verstellbare Betten für behinderte Menschen
EN 60601-1: 1996-03	Sicherheit für medizinische elektrische Geräte
EN 60601-1-2:2002-10	Elektromagnetische Verträglichkeit
DIN EN 60601-2-38/A1: 2001	Elektrisch betriebene Krankenhausbetten (reduziert auf die Belange der häuslichen Pflege)
	Eingruppierung als aktives Medizinprodukt der Klasse I (lt. MPG § 13).
	Erfüllt alle Zusatz-Sicherheitsanforderungen der Obersten Landesbehörden vom 22. Mai 2001 für Pflegebetten.

APPLIED STANDARDS AND GUIDELINES

Medical Products Directive
Repeat testing ... of medical electrical units
Technical aids for handicapped persons
Handicapped-friendly construction
Risk analysis for medical products
Adjustable beds for handicapped persons
Safety for electro-medical equipment
Electromagnetic tolerances
Electrically operated hospital beds (reduced to applications for in home care)
Classified as class I active medical product(in accordance with MPG § 13).
Fulfills all additional safety requirements by the Highest State Authority from May 22, 2001 for nursing beds.

Kapitel 10

Chapter 10



ENTSORGUNGSHINWEISE

- ♦ Dieses Pflegebett ist - sofern elektrisch verstellbar - als gewerblich genutztes Elektrogerät (b2b) eingestuft gemäß WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Elektro-Gesetz).
- ♦ Ausgetauschte elektrische Komponenten (Antriebe, Steuergeräte, Handschalter, usw.) dieser Pflegebetten sind wie Elektroschrott gemäß WEEE-Richtlinie zu behandeln und fachgerecht zu entsorgen.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

- ♦ This nursing bed is - if electrically adjustable - classified as a commercially used electric appliance (b2b) in accordance with WEEE-Guidelines 2002/96/EG (Electronics Law).
- ♦ Exchanged electronic components (drives, control unit, hand switch, etc.) of these nursing beds are considered electronic scrap and must be disposed of according to the WEEE-Guidelines.

- ◆ Bei Pflegebetten, die nach dem 13.08.2005 in Verkehr gebracht wurden (siehe Angabe "Serie" auf dem Typenschild am Kopfende), ist der Betreiber gesetzlich verpflichtet, deren elektrische Komponenten zur Entsorgung nicht in kommunale Sammelstellen zu geben, sondern direkt an den Hersteller zu schicken. BURMEIER und seine Service- und Vertriebspartner nehmen diese Teile zurück.
- ◆ Für diese Rücknahmen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- ◆ Nicht mehr verwendbare ausgebaute einzelne Akkus sind fachgerecht gemäß Batterieverordnung zu entsorgen und gehören nicht in den Hausmüll.
- ◆ Bei allen zu entsorgenden Komponenten ist vom Betreiber sicher zu stellen, dass diese nicht infektiös/ kontaminiert sind.
- ◆ Im Falle einer Verschrottung des Bettes sind die verwendeten Kunststoff- und Metallteile getrennt und fachgerecht zu entsorgen.
- ◆ Eventuell vorhandene Gasfedern stehen unter hohem Druck! Sie sind vor Entsorgung gemäß Herstellerangabe drucklos zu machen. Diese Angaben erhalten Sie auf Anfrage bei den Gasfeder-Herstellern (siehe Typenschild).
- ◆ Evtl. vorhandenen Gasfedern und Hydraulikeinheiten bestehen überwiegend aus Metall und Kunststoff. Vor der Entsorgung nach Herstellervorgabe ist das enthaltene Öl abzulassen und fachgerecht zu entsorgen.
- ◆ Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre örtlichen Kommunen, Entsorgungsunternehmen oder an unsere Serviceabteilung.
- ◆ With nursing beds that came into use after August 13, 2005 (see designation "Serial" on the type label at the head of the bed), the operator is required to not dispose of the electrical components in the municipal waste area, but to send them directly to the manufacturer. BURMEIER and their service and sales partners will take these parts back.
- ◆ Our general terms and conditions apply for this redemption.
- ◆ No longer useable rechargeable batteries have to be disposed of according to regulations and do not belong in the house garbage.
- ◆ With all disposed components the owner must make sure that they are not infectious or contaminated.
- ◆ In the event that the nursing bed must be scrapped, the plastic and metal parts used must be disposed of separately, following the proper disposal procedure.
- ◆ Pneumatic springs are under high pressure! Before disposal they have to be depressurized. Please contact the manufacturer of the device on how to depressurize them (see type plate).
- ◆ Hydraulic units are made up of mostly metal and plastic. Before disposing according to manufacturer guidelines the oil has to be drained and disposed of properly.
- ◆ Contact your local community, disposal facility or our service department with any questions.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270
D-32791 Lage / Lippe,

dass das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis:

Pflegebett WESTFALIA III / REHA

den Bestimmungen der EG Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte und den Zusatz-Sicherheitsanforderungen der Obersten Landesbehörden vom 22. Mai 2001 für Pflegebetten entspricht.

Angewendete harmonisierte Normen:

- VDE 0751-1:2001-10 Wiederholungsprüfungen ... von medizinischen elektrischen Geräten
- EN 12182:1999-11 Technische Hilfen für behinderte Menschen
- DIN 32977-1:1992-07 Behindertengerechtes Gestalten
- DIN EN 1970 : 2005-10 Verstellbare Betten für behinderte Menschen
- DIN EN 60601-1: 1996-03 Sicherheit für medizinische elektrische Geräte
- EN 60601-1-2:2002-10 Elektromagnetische Verträglichkeit
- DIN EN 60601-2-38/A1: 2001 Elektrisch betriebene Krankenhausbetten (reduziert auf die Belange der häuslichen Pflege)

Lage, 10.04.2006



(Pott)
(Geschäftsleitung)



(Rekermeier)
(Vertriebsleitung)

EC-Declaration of Conformity

We,

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Strasse 270
32791 Lage / Lippe
Germany

hereby declare that the product named below:

Nursing bed WESTFALIA III / REHA

complies with the regulations of EC Guidelines 93/42/EWG for medical products and fulfills all additional safety requirements by the Highest State Authority from May 22, 2001 for care beds.

Applied Standards:

- | | |
|------------------------------|---|
| ● VDE 0751-1:2001-10 | Repeat testing of ... medical electrical units |
| ● EN 12182:1999-11 | Technical aids for handicapped persons |
| ● DIN 32977-1:1992-07 | Handicapped-friendly constructions |
| ● DIN EN 1970 : 2005-10 | Adjustable beds for handicapped persons |
| ● DIN EN 60601-1: 1996-03 | Safety for electro-medical equipment |
| ● EN 60601-1-2:2002-10 | Electromagnetic tolerances |
| ● DIN EN 60601-2-38/A1: 2001 | Electrically operated hospital beds
(reduced to applications for in home care) |

Lage, April 10, 2006



 (Pott)
 (Geschäftsleitung)



 (Rekermeier)
 (Vertriebsleitung)

Herausgegeben von:

Burmeier GmbH & Co. KG
(Ein Unternehmen der Stieglmeyer-Gruppe)
Pivitsheider Straße 270
D-32791 Lage/Lippe
Telefon 0 52 32 / 98 41- 0
Telefax 0 52 32 / 98 41- 41
Internet www.burmeier.de
Email
auftrags-zentrum@burmeier.de

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
des Herausgebers!

Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten!

168242
Doc-Item: Westfalia_III_v2

Realisiert: info@docnik.de

Published by:

Burmeier GmbH & Co. KG
(A subsidiary of the Stieglmeyer Group)
Pivitsheider Strasse 270
32791 Lage/Lippe, Germany
Phone ++49 52 32 / 98 41- 0
Telefax ++49 52 32 / 98 41- 41
Internet www.burmeier.de
Email
auftrags-zentrum@burmeier.de

No part of this manual may be reproduced with-
out the prior written permission of the publisher!

All rights reserved.
Subject to technical changes!

168242
Doc-Item: Westfalia_III_v2

Realisation: info@docnik.de

